

ORALSAN®

Dispositivi elettrici per l'igiene orale





Sonic Toothbrush

■ SMART

Design compatto ed ergonomico, batteria con durata fino a 50 giorni,
5 modalità di utilizzo
con memorizzazione e timer intelligente
per una straordinaria esperienza di igiene orale.

■ POTENTE

38.000 oscillazioni ad alta frequenza al minuto
e testina con setole DuPont Diamond
per un'efficacia pulente superiore nel rimuovere placca dentale,
residui di cibo, macchie ecc.

■ IGIENICO

Resistenza all'acqua IPX7, che permette di sciacquare
lo spazzolino direttamente con acqua corrente.
Dotato di panno per pulizia e asciugatura,
copri testine e custodia per il viaggio.

Confezionamento:

360100.....st8 Sonic Toothbrush

(2) Testine medium (2) Copri testine (1) Custodia da viaggio
(1) Cavo alimentazione (1) Manuale d'uso (1) Panno pulizia

360101.....(2) **Testine di ricambio Medium**

360102.....(2) **Testine di ricambio Soft**



2

Testine con
spazzolino medio



2

Copri
testina



1

Custodia



1

USB
Cavo ricarica





ORALSAN® st8

Sonic Toothbrush

Programmi



Modalità standard di pulizia quotidiana per rimuovere efficacemente tutti i tipi di placca.



Azione decisa per un'efficace rimozione delle macchie.



Movimenti intensi ad alta velocità e frequenza per lucidare i denti frontali.



Delicata pulizia e massaggio delle gengive per migliorarne la salute.



Delicata rimozione della placca, adatta per primi utilizzi, persone con sensibilità dentale, anziani e adolescenti.

ORAL CARE

Clean

Pulizia denti e gengive

SMILE BEAUTY

White

Rimozione delle macchie

Polish

Lucidatura dello smalto

SPECIAL NEEDS

Gum care

Massaggio gengivale

Sensitive


Pulizia delicata di denti e gengive

Modalità d'uso

1.


Premere il pulsante di avvio per accendere lo spazzolino sonico. Premere il pulsante di modalità per scegliere la modalità di utilizzo preferita.

(Al successivo utilizzo lo spazzolino selezionerà automaticamente l'ultima modalità selezionata).
Bagnare le setole prima di ogni utilizzo per sfruttare al meglio il principio sonico dello spazzolino.

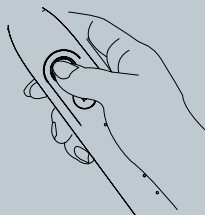

2.


Uso della testina:
premere la testina contro la superficie dei denti, con una leggera inclinazione rispetto al bordo gengivale.

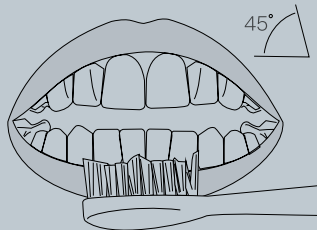

3.

Esercitare una leggera pressione per ottimizzare l'efficacia dello spazzolino sonico e lasciare che lavori autonomamente, senza spazzolare in modo che sia la vibrazione delle setole a lavorare rimuovendo residui e placca batterica.

La pressione esercitata dipende dall'esperienza nell'uso.

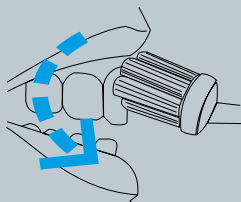


4.

Posizionare la testina dello spazzolino sonico sul margine gengivale in modo che le setole si appoggino sia sul dente che sulla gengiva e lasciare vibrare le setole per qualche secondo, quindi si passa al dente accanto mantenendo la testina in posizione sul margine gengivale.


In questo modo si permette all'azione fluidodinamica data dalle vibrazioni delle setole di detergere con efficacia il dente e di massaggiare la gengiva.

Si prosegue su entrambe le arcate dentro e fuori per completare la pulizia di tutta la bocca secondo lo schema seguente.

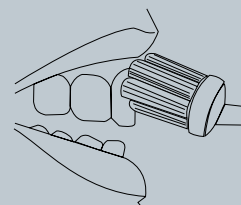


5.

Per garantire una pulizia orale uniforme, dividere la bocca in quattro zone distinte. Iniziare la pulizia dalla zona 1 (parte esterna denti superiori) e spazzolare per 30 secondi prima di passare alla sezione 2 (parte interna denti superiori). Continuare poi con la zona 3 (parte esterna denti inferiori) e spazzolare per 30 secondi prima di passare alla zona 4 (parte interna denti inferiori).

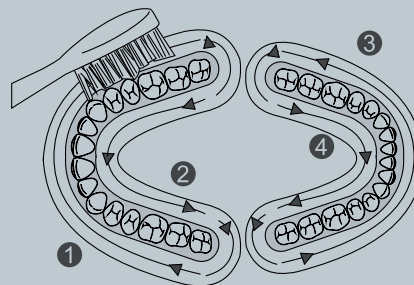

Smart timer: ogni modalità si attiva per un tempo determinato; spazzolare ogni area (inferiore labiale-linguale e superiore labiale-linguale) per 30 secondi per un totale di 2 minuti. Il timer segnerà quando cambiare area.

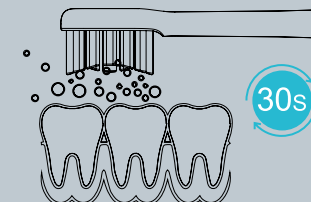

6.

Dopo aver completato il ciclo di igiene orale, continuare spazzolando le superfici di masticazione dei denti e le aree dove si concentrano le macchie.


Nota:

lo spazzolino sonico è sicuro per i seguenti utilizzi:

- Apparecchi ortodontici (la testina tende ad usarsi prima se utilizzata su apparecchi ortodontici)
- Restauri protesici (otturazioni, corone, porcellane), per le quali si raccomanda l'utilizzo della modalità SENSITIVE.

Nota:

è possibile spegnere lo spazzolino in qualsiasi momento premendo il pulsante di avvio.

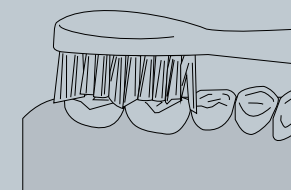



ORALSAN[®] wf3

Compact Water Flosser

COMPATTO

Design avanzato, e serbatoio richiudibile e ricaricabile senza doverlo rimuovere

MOBILE

Batteria ricaricabile, mini formato tascabile, custodia per il viaggio e panno per pulizia e asciugatura.

PERSONALIZZABILE

5 regolazioni di velocità del getto
4 diversi puntali

Confezionamento:

03WF3 **wf3 Compact**

(5) Puntali (1) Manuale d'uso

(1) Custodia da viaggio

(1) Cavo alimentazione (1) Panno pulizia



Puntali



2

Puntale
irrigazione
standard



1

Puntale
pulisci
lingua



1

Puntale
sub
gengivale



1

Puntale
ortodontico



200 ml
Capacità serbatoio



5
Puntali



5
Regolazioni getto



2500mAh
Batteria



ORALSAN[®] wf5

Cordless Water Flosser

■ VERSATILE

Senza filo con batteria ricaricabile, waterproof custodia per il viaggio e panno per pulizia e asciugatura.

■ ERGONOMICO

Impugnatura anti scivolo, serbatoio ricaricabile senza doverlo rimuovere

■ PERSONALIZZABILE

5 regolazioni di velocità del getto
4 diversi puntali

Confezionamento:

03WF5 **wf5 Cordless**

(5) Puntali (1) Custodia da viaggio

(1) Manuale d'uso

(1) Cavo alimentazione USB (1) Panno pulizia



Puntali



2

Puntale
irrigazione
standard



1

Puntale
pulisci
lingua



1

Puntale
sub
gengivale



1

Puntale
ortodontico



300 ml
Capacità serbatoio



5
Puntali



5
Regolazioni getto



2500mAh
Batteria



ORALSAN® wf7

Desktop Water Flosser

FAMILY

Desktop ideale per la famiglia con ampio serbatoio,
6 regolazioni di velocità del getto
per un'ampia scelta personale,
11 puntali assortiti per la pulizia orale e irrigazione nasale
per tutta la famiglia.

SICURO

Design avanzato con protezione dal surriscaldamento,
base stabile anti-ribaltamento con piedini antiscivolo

IGIENICO

Alloggiamento nella base per 4 puntali pronti all'uso,
alloggiamento nel coperchio per i restanti puntali.
Panno per pulizia e asciugatura,
vaschetta reversibile per coprire il dispositivo.

Confezionamento:

03WF7 wf7 Desktop

(11) Puntali (1) Manuale d'uso

(1) Panno pulizia



Puntali



4

Puntale
irrigazione
standard



2

Puntale
pulisci
lingua



1

Puntale
sub
gingivale



1

Puntale
ortodontico



1

Puntale
spazzolino



2

Puntale
doccia
nasale



1000 ml

Capacità
serbatoio



11

Puntali



6

Regolazioni
getto



AC-200V - 50/60Hz

Alimentazione

Puntali irrigazione



ORALSAN Wf3	ORALSAN Wf5	ORALSAN Wf7		
2	2	4	GENERAL ORAL CARE	 Pulizia interprossimale e gengivale Puntale irrigazione standard
1	1	2		 Pulizia lingua e guance Puntale pulisci lingua
1	1	1	SPECIAL NEEDS	 Perio Puntale sub gengivale
1	1	1		 Ortho Puntale ortodontico
-	-	1		 Massaggio gengivale e pulizia protesi Puntale spazzolino
-	-	2	NASAL CARE	 Lavaggio nasale Puntale doccia nasale

Puntali irrigazione


Pulizia interprossimale e gengivale

Puntale irrigazione standard



Posizionarsi al di sopra del lavandino e dirigere il getto verso i denti e le gengive. Azionare l'interruttore per avviare il flusso d'acqua. Tenere la bocca leggermente aperta per permettere all'acqua di scorrere nel lavandino.

Dirigere il flusso d'acqua verso il bordo gengivale con un'inclinazione di 90 gradi, in modo che il contatto avvenga nel punto di incontro tra denti e gengive. Spostare il flusso d'acqua da dente a dente, soffermandosi brevemente tra un dente e l'altro.

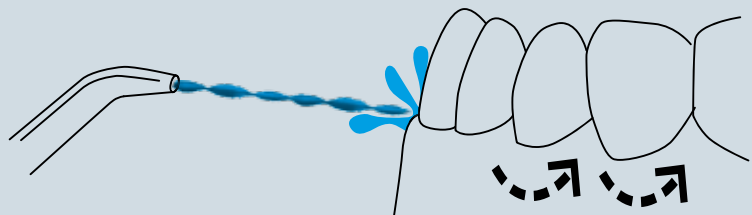

Il Filo interdentale d'Acqua

GENERAL ORAL CARE


Pulizia lingua e guance

Puntale pulisci lingua



Impostare la pressione al valore minimo e regolare a piacere su valori più alti per una maggiore quantità di acqua se necessario.

Posizionarsi al di sopra del lavandino. Avviare l'irrigatore e posizionare il puntale pulisci lingua nella parte posteriore della stessa muovendolo in avanti per effettuare la pulizia. Ripetere fino a quando non si sia pulita l'intera superficie. La stessa operazione può essere utilizzata per pulire l'interno delle guance.

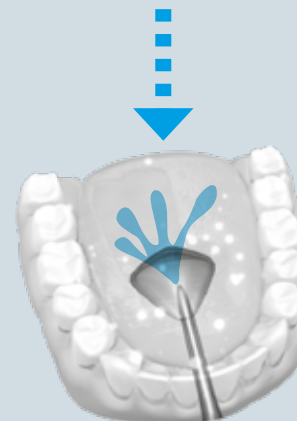

Puntali irrigazione

Perio

Puntale sub gengivale




Impostare la pressione al valore più basso.

Posizionare il puntale sub gengivale nel punto di contatto tra denti e bordo gengivale. Appoggiare la punta morbida sul dente con un'angolazione di 45 gradi e posizionala delicatamente al di sotto del bordo gengivale, nella tasca.

Avviare l'idropulsore e pulire seguendo delicatamente il bordo gengivale, inserendo il puntale sub gengivale tra i denti.

Continuare lungo il bordo gengivale per massaggiare le gengive e irrigare con la soluzione le tasche al di sotto del bordo.

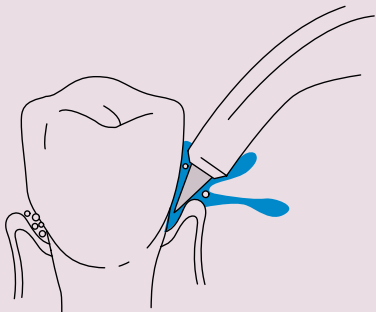

SPECIAL NEEDS


Ortho

Puntale ortodontico



Utilizzare il puntale ortodontico per spazzolare e contemporaneamente sciacquare aree difficili da raggiungere attorno ad apparecchi, corone, ponti e impianti. Cominciare dall'ultimo molare (denti posteriori). Posizionare il puntale con un'angolazione di 90 gradi rispetto a denti e bordo gengivale.

Far scorrere delicatamente il puntale lungo il bordo gengivale soffermandosi brevemente per spazzolare dolcemente l'area interdentale e tutto intorno agli attacchi ortodontici, prima di procedere con il dente successivo e all'esterno di denti inferiori e superiori. Continuare il processo fino a che anche l'interno non sia stato pulito.

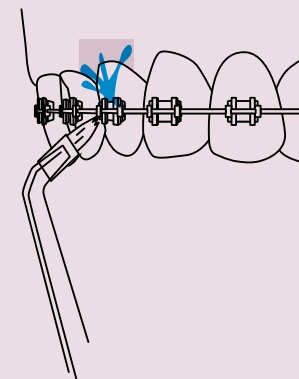

Puntali irrigazione


Massaggio gengivale e pulizia protesi

Puntale spazzolino



Posizionare la testa dello spazzolino nel cavo orale prima di avviare l'idropulsore. Muovere lo spazzolino delicatamente lungo l'area di denti e bordo gengivale e lasciare la punta dello spazzolino sulla superficie di ogni dente per qualche secondo, con un leggero scorrimento dello stesso per una migliore pulizia di denti e gengive ed un effetto massaggiante. Questo movimento permette di sciogliere residui e particelle di cibo più grandi prima che siano sciacquate via.

Questo puntale è ideale per la pulizia di qualsiasi protesi dentale, sia fissa che mobile, allineatori ortodontici e mascherine di sbiancamento.

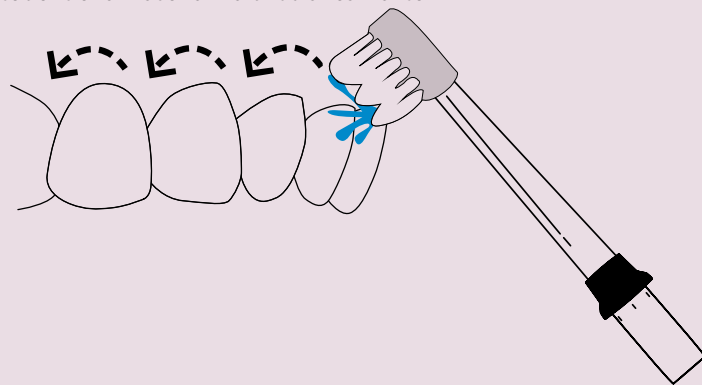

NASAL CARE

Lavaggio nasale

Puntale doccia nasale






A. Posizionare il bulbo nasale morbido blu sul lavandino, con l'estremità della punta indirizzata verso l'alto. Azionare il getto d'acqua regolando la pressione in modo che il flusso raggiunga l'altezza di un 2-3 centimetri. Spegnerne il dispositivo.

B. Inserire il bulbo nasale morbido blu delicatamente all'interno del naso. Sporgersi verso il lavandino in modo da vedere lo scarico. In questa posizione la soluzione non verrà diretta verso la gola, ed il lavaggio risulterà confortevole e piacevole.

C. Azionare il getto. La soluzione verrà diretta verso un lato del naso, uscendo dall'altro, stimolando le ciglia nasali e rimuovendo corpi estranei. Continuare a sciacquare fino a quando il liquido che fuoriesce non sia trasparente.

D. Spegnerne il dispositivo. Rimuovere il puntale dalla narice in cui si trova e posizionarlo nell'altra. Azionare il getto, ripetendo il processo. Utilizzare circa il 50% della soluzione per ogni lato del naso.

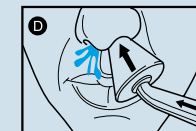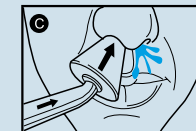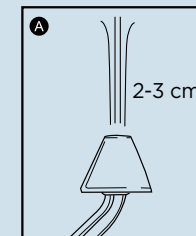



IDS S.p.a. - Via San Cristoforo, 28/10
17100 Savona - Italia
Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865
email: info@idsdental.it
www.idsdental.it

Rev 0 - 11/11/21

