



In office whitening protocols

Protocolli Sbiancamenti in Studio

In der Praxis stattfindende Aufhellungsverfahren

Protocoles de blanchiment en cabinet

Protocolos de blanqueamiento en la consulta

Protocolos de branqueamento em consultório





In office whitening treatments

Trattamenti di Sbiancamento in Studio

In der Praxis stattfindende Aufhellungsbehandlungen - Traitements de blanchiment en cabinet

Tratamientos de blanqueamiento en la consulta - Tratamentos de branqueamento em consultório

CLICK

Light and fast treatment to be combined to the hygiene session

Trattamento veloce e leggero abbinabile all'igiene dentale
Eine mit der Dentalhygiene-Sitzung kombinierbare, schnelle und leichte Behandlung
Traitement rapide et léger exécutable lors de la séance d'hygiène dentaire
Tratamiento rápido y ligero que se puede combinar con la limpieza dental
Tratamento rápido e suave, combinável com a limpeza dentária

WHITENESS	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DURATION	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PRICE LEVEL	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

CLICK CP16%


TOUCH

Intensive and delicate cosmetic treatment

Trattamento cosmetico intensivo e delicato
Eine sanfte und intensive kosmetische Behandlung
Traitement cosmétique intensif et délicat
Tratamiento cosmético intensivo y delicado
Tratamento cosmético intensivo e delicado

WHITENESS	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DURATION	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PRICE LEVEL	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

TOUCH CP16%
TOUCH+ HP6% *

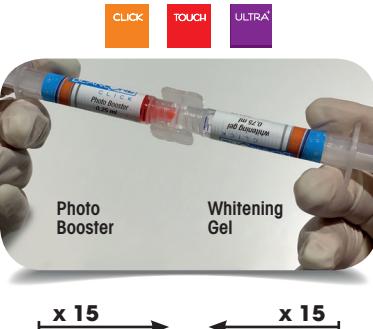


ULTRA

Medical treatment of tooth discolorations

Trattamento medicale delle discromie dentali
Eine medizinische Behandlung von Dyschromien
Traitement médical des dyschromies dentaires
Tratamiento médico de las discromías dentales
Tratamento médico das descolorações dentárias

WHITENESS	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DURATION	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PRICE LEVEL	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

ULTRA HP29%
ULTRA+ HP25% *

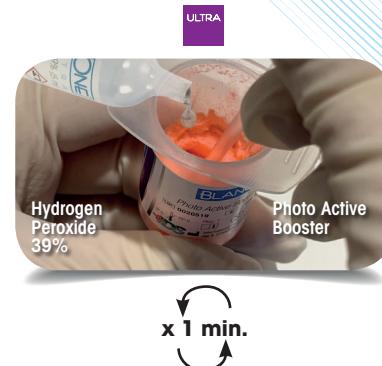

ARCUS+ Ruler
Righello Arcus+
Lineal Arcus+
Règle Arcus+
Regla Arcus+
Régua Arcus+



* From 2020


** ARCUS+ only

In office protocols table

Tavola Protocolli in Studio

Tabelle f. in der Praxis stattfindende Verfahren - Tableau des protocoles en cabinet - Tabla de protocolos en la consulta - Tabela de protocolos em consultório

ARCUS						
Treatment	Number of applications	Temperatura / Distance	Time of each application	Typical improvement	Patient's habits	Follow up (check-up)
Trattamento Behandlung Traitement Tratamiento Tratamento	n° di applicazioni Anzahl der Anwendungen Nombre d'applications Número de aplicaciones Número de aplicações	Temperatura Distanza Temperatur / Abstand Température / Distance Temperatura / Distancia Temperatura / Distância	Tempo per ogni applicazione Zeit für jede Anwendung Temps par application Duración de cada aplicación Tempo por cada aplicação	Miglioramento tipico Typische Verbesserung Amélioration typique Mejoría típica Melhoria típica	Abitudini del paziente Gewohnheiten des Patienten Habitudes du patient Hábitos del paciente Hábitos do paciente	Follow up (controllo) Follow up (Kontrolle) Suivi (contrôle) Seguimiento (control) Acompanhamento (controlo)
CLICK	1	 	10 minutes 12 minutes	4/5 shades	  	3 months 2 months 1 months
TOUCH	3-4	 	8 minutes 10 minutes	6/7 shades	  	9-12 months 6-9 months 3-6 months
ULTRA	4-6	 	4 minutes 6 minutes	Up to 10 shades	  	12-24 months 9-18 months 6-12 months
ULTRA ⁺	3-4	 	6 minutes 8 minutes			

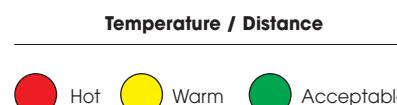

 **NO staining drinks (coffee, tea, red wine) - NO smoking**
NO bevande pigmentanti (caffè, tè, vino rosso) - NO fumo
Trinkt verfärbende Getränke (Kaffee, Tee, Rotwein) NEIN - Raucht NEIN
NON boissons teintées (café, thé, vin rouge) - NON tabac
NO bebidas pigmentantes (café, té, vino tinto) - NO tabaco
NÃO consome bebidas pigmentadas (café, chá, vinho tinto) - NÃO fuma

 **YES staining drinks (coffee, tea, red wine) - NO smoking**
Sì bevande pigmentanti (caffè, tè, vino rosso) - NO fumo
Trinkt verfärbende Getränke (Kaffee, Tee, Rotwein) JA - Raucht NEIN
OUI boissons teintées (café, thé, vin rouge) - NON tabac
Sí bebidas pigmentantes (café, té, vino tinto) - NO tabaco
SIM consome bebidas pigmentadas (café, chá, vinho tinto) - NÃO fuma

 **YES staining drinks (coffee, tea, red wine) - YES smoking**
Si bevande pigmentanti (caffè, tè, vino rosso) - SÌ fumo
Trinkt verfärbende Getränke (Kaffee, Tee, Rotwein) JA - Raucht JA
OUI boissons teintées (café, thé, vin rouge) - OUI tabac
Sí bebidas pigmentantes (café, té, vino tinto) - SÍ tabaco
SIM consome bebidas pigmentadas (café, chá, vinho tinto) - SÌ fuma

According to each patient skin
and kind of treatment, select
lamp distance and protections
necessary to guarantee comfort
and safety of your patients.

ARCUS	Distance Temperature
■	Acceptable
■	Warm
■	Hot

CARE	Protection
■	Face & lips
■	Gum

CLICK

TOUCH

ULTRA


In base alla pelle del paziente
e al tipo di trattamento, seleziona-
re la distanza della lampada e le
protezioni necessarie a garantire
il confort e la sicurezza del pa-
ziente.

**Je nach Hauttyp des Patienten und
je nach Art der Behandlung, den Ab-
stand der Lampe und die erforderli-
chen Schutzmaßnahmen auswählen,
damit die Behandlung für den Patien-
ten sicher und komfortabel abläuft.**

**En fonction de la peau du pa-
tient et du type de traitement,
sélectionner la distance de la
lampe et les protections néces-
saires pour garantir le confort et
la sécurité du patient.**

**Según la piel del paciente y el
tipo de tratamiento, seleccionar
la distancia de la lámpara y las
protecciones necesarias para ga-
rantizar el confort y la seguridad
del paciente.**

**Em função da pele do paciente
e do tipo de tratamento, selecio-
nar a distância da lâmpada e as
proteções necessárias para ga-
rantir o conforto e segurança do
paciente.**

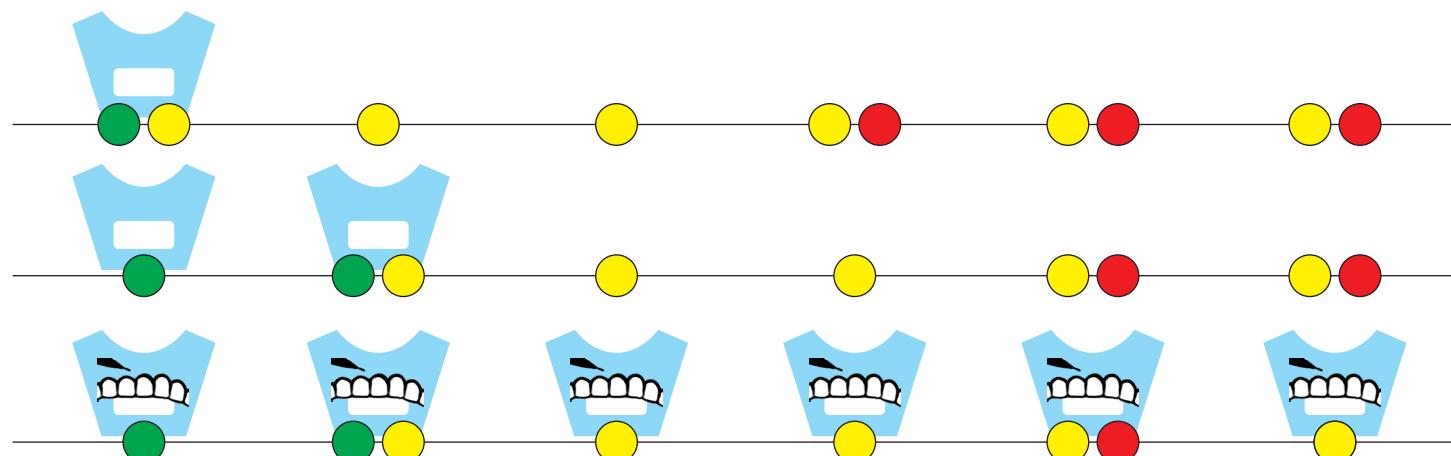

Patient protection protocol

Protocollo di protezione del paziente

Protokoll zum Schutz des Patienten - Protocole de protection du patient

Protocolo de protección del paciente - Protocolo de proteção do paciente

ULTRA
TOUCH
CLICK



1 Positioning of cheek retractor and protective goggles

Posizionamento dell'apribocca e degli occhiali protettivi

Positionierung von Mundsperrer und Schutzbrille

Mettre l'ouvre-bouche et les lunettes de protection

Colocación del abreboquas y las gafas protectoras

Posicionamiento do abre-bocas e dos óculos de proteção



ULTRA
TOUCH



2 Lips covering by means of gauze

Rivestimento delle labbra con garza

Auskleiden der Lippen mit Mull

Recouvrir les lèvres avec une compresse

Revestimiento de los labios con gasa

Revestimento dos lábios com gaze



3 Face protection fastened the cheek retractor

Protezione facciale agganciata all'apribocca

Am Mundsperrer festgemachter Gesichtsschutz



Accrocher la protection du visage à l'écarteur

Protección facial enganchada a l'ouvre-bouche

Proteção facial encaixada no abre-bocas



ULTRA

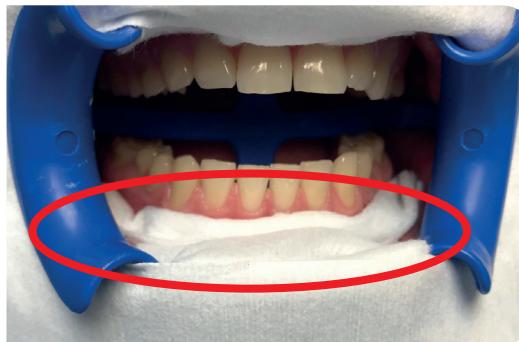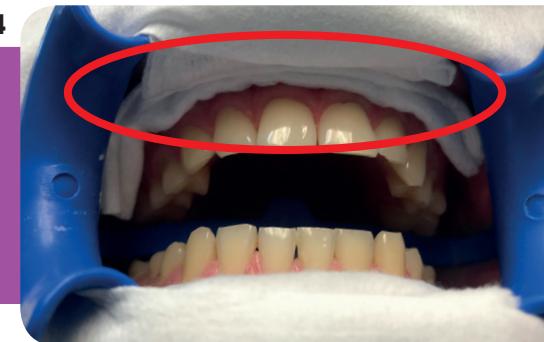

4 Gauze insulation between gums and lips

Isolamento tra gengive e labbra con garza

Isolierung zwischen Zahnfleisch und Lippen mit Mull

Isoler les gencives et les lèvres avec une compresse

Aislamiento entre encías y labios con gasa

Isolamento entre as gengivas e os lábios com gaze



5 Cheeks insulation by means of gauze

Isolamento delle guance con garza

Isolierung der Wangen mit Mull

Isoler les joues avec une compresse

Aislamiento de las mejillas con gasa

Isolamento das bochechas com gaze





Tongue depressor covering by means of gauze

Rivestimento del ferma lingua con garza

Auskleiden des Zungensperrers mit Mull

Recouvrir l'abaisse-langue avec une compresse

Revestimiento del separador de lengua con gasa

Revestimento do depressor de língua com gaze



Gums insulation with gingival barrier

Isolamento delle gengive con barriera gengivale

Isolierung des Zahnfleisches mit Zahnfleischbarriere

Isoler les gencives avec une barrière gingivale

Aislamiento de las encías con barrera gingival

Isolamento das gengivas com barreira gingival



Whitening gel application

Applicazione del gel sbiancante

Auftragung des Bleichgels

Appliquer le gel de blanchiment

Aplicación del gel blanqueador

Aplicação do gel branqueador




Compulsory use

Uso obbligatorio

Muss verwendet werden - Usage obligatoire

Uso obligatorio - Uso obrigatório

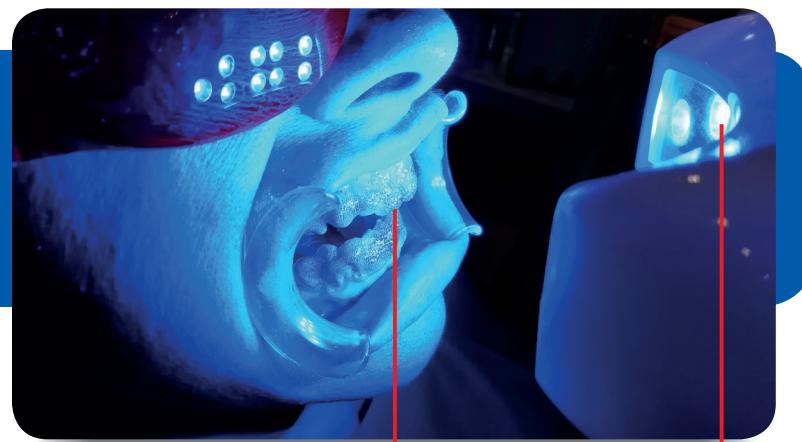

Lamp distance adjustment - mouth


Regolazione distanza lampada - bocca

Regulierung des Abstands Lampe - Mund

Régler la distance lampe - bouche

Regulación de la distancia entre la lámpara y la boca

Regulação da distância lâmpada - boca

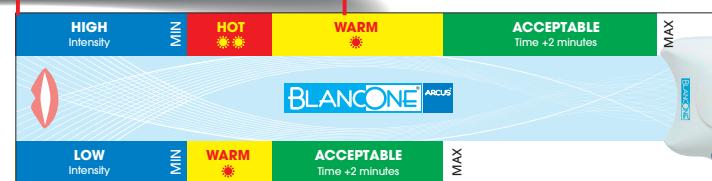

Optional use

Uso facoltativo

Kann verwendet werden - Usage facultatif

Uso facultativo - Uso facultativo



CARE

BlancOne® CHEEK RETRACTOR*

Cheek retractor


Divaricatori guanciali

Wangenhalter


Ouvre-bouche

Retractores de mejillas

Retratores de bochecha

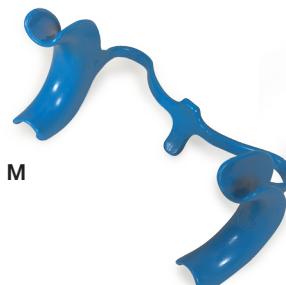

030102N - MEDIUM single use - 10 pcs.

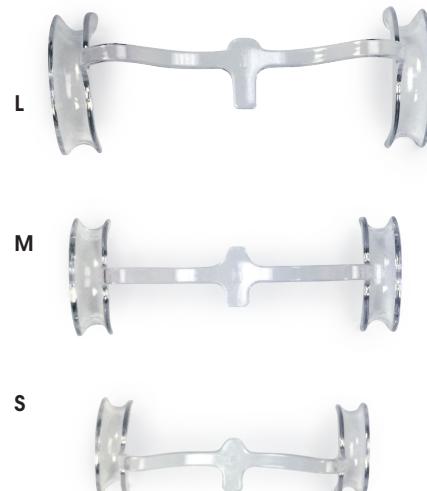

030103 - LARGE Autoclavable - 1 pc.

030100 - MEDIUM Autoclavable - 1 pc.

030104 - SMALL Autoclavable - 1 pc.



BlancOne® GINGIVAL BARRIER*

Protective gingival barrier

Barriera gengivale

Zahnfleischschutz

Barrière gingivale

Barrera gingival

Barreira gengival

019001N BlancOne® Gingival Barrier+ - 2 ml + 4 Volu-flo



BlancOne® SAFETY KIT

Protective kit for the patient

Kit di protezione per il paziente

Schutzkit für den Patienten

Kit de protection pour le patient

Kit de protección para el paciente

Kit de proteção do paciente

019020N - BlancOne® SAFETY KIT
10 face protections
80 protective gauzes
10 vitamin E swabs



- 019021 - 10 face protections (1)
- 019022 - 80 protective gauzes (2)
- 019023 - 10 vitamin E swabs (3)



Protective goggles

Occhiali Protettivi

Schutzbrille

Lunettes de protection

Gafas protectoras

Óculos de proteção



873436 - Protective goggles

Download

BlancOne® PRO app:



A powerful tool improving the professional approach of each treatment

Un potente strumento che evolve la professionalità di ogni tuo trattamento

Ein leistungsstarkes Instrument, das die Professionalität all Ihrer Behandlungen noch steigert

Un puissant instrument qui optimise la qualité professionnelle de chaque traitement

Un potente instrumento para aumentar la profesionalidad de cada tratamiento

Um poderoso instrumento que aumenta o profissionalismo de cada tratamento



BLANCONE®

**The quick and gentle
professional teeth whitening**

www.blancone.eu/pro



IDS
Spa

17100 Savona - Via Valletta San Cristoforo, 28/10

Tel. +39 019 862080 - Fax +39 019 2304865 - www.idsdental.it - info@idsdental.it