



I

La penna BrightOne fa parte del sistema sbiancante professionale BlancOne. Questo trattamento intensivo con tecnologia fotodinamica, sviluppa un'azione sbiancante profonda in modo rapido, sicuro ed indolore.

La penna BrightOne potrà quindi essere utilizzata periodicamente per mantenere i denti chiari e luminosi a lungo. Per maggiori informazioni: www.blancone.it

GB

The BrightOne pen is part of the BlancOne professional whitening system. Thanks to the use of photodynamic technology, this intensive treatment deeply whitens teeth quickly, safely and painlessly. Therefore, the BrightOne pen can be used periodically to keep teeth bright and dazzling for a long time. For additional information visit: www.blancone.it

F

Le stylo BrightOne fait partie d'un système de blanchiment professionnel BlancOne. Ce traitement intensif, qui utilise la technologie photodynamique, exerce une action blanchissante profonde, rapide, sûre et indolore.

Le stylo BrightOne peut donc être utilisé périodiquement pour garder longtemps des dents éclatantes et lumineuses. Pour de plus amples informations: www.blancone.it

BRIGHT ONE

Penna
schiarente
per denti



Teeth
brightening
pen



Stylo
d'éclaircissement
dentaire



INTERNATIONAL DENTAL SUPPLY

ITALY - 17100 Savona
Via Valletta San Cristoforo, 28/10
www.oralson.it - info@idsdental.it



1

I Istruzioni d'uso

Applicare una volta al giorno, preferibilmente per 14 giorni consecutivi.

① Asciugare la superficie dei denti con un fazzoletto di carta per un migliore risultato.

② Premere il bottone sul retro della penna per estrarre il gel sul puntale a spugna.

NOTA: La prima volta possono essere necessari diversi "click" prima che il gel raggiunga la spugna.

③ Sorridere in modo da allontanare le labbra dai denti. Spazzolare gentilmente sulla superficie dei denti.

Precauzioni ed Avvertenze

In caso di irritazione (arrossamento, gonfiore, fastidio) delle gengive o delle mucose orali, interrompere l'uso e consultare un dentista. Il prodotto contiene perossidi e non è indicato per bambini al di sotto dei 12 anni. Non utilizzare oltre i 14 giorni salvo diverse indicazioni del dentista o igienista. Evitare il contatto con gli occhi.

Non ingerire. Evitare il contatto diretto del gel sbiancante con le gengive e/o la saliva.



2

GB Instructions

Apply once a day, preferably for 14 consecutive days.

① Dry teeth with a tissue for the best results.

② Press the button on the back of the pen to extrude the gel onto the sponge tip.


NOTE: Several "clicks" may be needed to make the gel reach the sponge the first time the pen is used.

③ Make a big smile so that the lips pull away from the teeth. Brush gently on the surface of the teeth.

Cautions and Warnings

If irritation (such as redness, swelling, soreness) of the gums or the mouth occurs, discontinue use and consult a dentist. This product contains peroxides and is not recommended for use by children under 12 years of age. The product can be used for more than 14 days only under the supervision of a dentist or a hygienist. Avoid contact with the eyes.

Do not swallow. Do not allow the tooth whitening gel to come in direct contact with the gums and/or saliva.

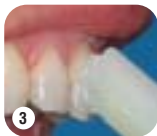

3

F Mode d'emploi

Appliquer une fois par jour, de préférence pendant 14 jours consécutifs.

① Sécher les dents avec un mouchoir en papier pour de meilleurs résultats.

② Appuyer sur le bouton au dos du stylo pour pousser le gel vers la pointe en éponge.

REMARQUE: plusieurs clics sont généralement nécessaires la première fois pour que le gel atteigne l'éponge.

③ Sourire intensément pour garder les lèvres éloignées des dents. Frotter doucement sur la surface des dents.

Précautions et Mises en Garde

En cas d'irritation des gencives ou des muqueuses orales (rougeur, gonflement, gêne), interrompre l'utilisation et consulter un dentiste. L'utilisation de produits contenant des peroxydes n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 12 ans. N'utiliser le produit pendant plus de 14 jours que sur autorisation du dentiste ou de l'hygiéniste. Éviter tout contact avec les yeux.

Ne pas avaler. Éviter le contact direct du gel blanchissant avec les gencives et/ou la salive.