



### Snap -n- Go™

Two-tone plaque disclosing swabs | Tamponi rivelatori di placca a due toni | Zweifarbige Plaque-Indikatorstäbchen | Tampons révélateurs de plaque à deux teintes | Hisopos reveladores de placa en dos tonos | Cotonetes para identificar placa de duas cores | Tweekleurige plakverklipper wattenstaafjes | Tofarvet plakvatpind | Plakkiväripuikko | Tofarvede vattpinner til plakk | Bomulspinnar för plackdetektion med två färger | Wymazówki dwutonowe do wykrywania płytki nazębnej | Dvoubarvné tampóny pro detekci plaku | Dvojtónové tampóny na detekciu zubného povlaku | Kéttonúsú lepedékfeltáró tamponok | Tamponos detectores de placă bacteriană în două tonuri de culoare | Двуцветный индикатор зубного налета | Iki tonu dişi tespit için sürüntü çubukları

مماثلات الكشف عن اللويحات السنوية بدرجاتي لون

CONTAINS: Water, glycerin, methylparaben, potassium sorbate, propylparaben, sorbic acid, sodium hydroxide, CI 45410, CI 42090.

IDS Spa - 17100 Savona - Italy  
Via San Cristoforo, 28/10  
Tel. +39 019 862080 - www.idsdental.it


Beutlich Pharmaceuticals LLC  
7775 S. US Hwy 1, Suite H  
Bunnell, FL 32110, USA

Rev. 10 - Jan 24

### ES Hisopos reveladores de placa en dos tonos Snap -n- go™

Cada hisopo Clean&White Reveal Snap -n- Go contiene un colorante indicador que se adhiere a la placa de los dientes y encías. Se trata de una herramienta útil para ayudar a realizar una mejor higiene dental profesional, ya que sirve de guía en la identificación y la eliminación del biofilm dental. LIMPIO y FÁCIL de aplicar por parte del odontólogo / higienista. Un complemento perfecto para las instrucciones de higiene oral en la clínica. MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre los dientes Clean&White Reveal antes de empezar el proceso de la higiene dental profesional. Pasar el hisopo por dientes y encías. Dejar actuar 10 segundos. Enjuagar suavemente con agua. Examinar los dientes para detectar áreas de color azul o rosado-rojizo. Las áreas teñidas de azul indican donde está la placa más antigua y las áreas rosadas indican la presencia de placa nueva. Usar como guía para la eliminación de la placa con el ultrasonido. ATENCIÓN: los niños menores de 6 años deben utilizar el producto solo bajo la supervisión directa de un adulto. Solo para uso dental. No ingerir. Clean&White Reveal contiene colorantes rojos y azules que podrían manchar ropa y otros materiales si entran en contacto con estos.


### PARA UN MEJOR RESULTADO

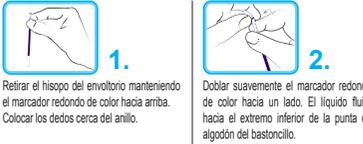

### GB Snap-n-go™ two-tone plaque disclosing swabs

Each Clean&White Reveal Snap -n- Go Swab contains an indicating dye that attaches to plaque on teeth and gums. This is a helpful tool to improve professional dental hygiene. guiding biofilm disclosure and removal. NEAT and EASY for the dental professional to apply. A perfect adjunct for oral hygiene instruction in the dental office. TO USE: Before starting professional dental hygiene, apply Clean&White Reveal plaque disclosing to the teeth by dabbing swab along the teeth and gums. Allow to remain in place for 10 seconds. Gently rinse with water. Examine teeth for areas that appear blue and reddish-pink. Blue areas indicate where old plaque is present and reddish-pink areas indicate the presence of new plaque. Use this to guide plaque removal with scaler tip and air prophylax powders. CAUTION: Children 6 years and younger should only use under direct adult supervision. For dental use only. Do not swallow. Reveal contains red and blue dyes, which will stain clothing and other materials if allowed to come in contact with them.


### FOR BEST RESULTS

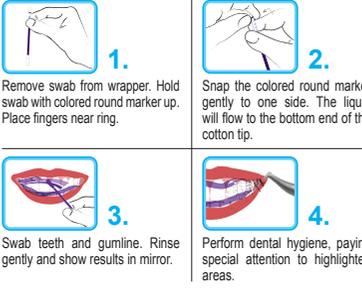

### IT Tamponi rivelatori di placca a due toni Snap -n- go™

Ogni tampone Clean&White Reveal Snap -n- Go contiene un colorante evidenziatore che si attacca alla placca su denti e gengive. Questo è uno strumento utile per migliorare l'igiene dentale professionale guidando l'individuazione e la rimozione del biofilm. PULITO e FACILE da applicare per il dentista. Un complemento perfetto per le istruzioni di igiene orale nello studio dentistico. MODO D'USO: Prima di iniziare l'igiene dentale professionale, applicare sui denti Clean&White Reveal, tamponando il tampone lungo i denti e le gengive. Lasciare in posizione per 10 secondi. Sciocquare delicatamente con acqua. Esaminare i denti per le aree che appaiono blu e rosa-rossastre. Le aree blu indicano dove è presente la vecchia placca e le aree rosa rossastre indicano la presenza di una nuova placca. Usalo per guidare la rimozione della placca con la punta dell'abbotto e le polveri per proflassi ad aria. ATTENZIONE: i bambini di età pari o inferiore a 6 anni devono utilizzare solo sotto la diretta supervisione di un adulto. Solo per uso dentale. Non ingerire. Reveal contiene coloranti rossi e blu, che macchiano i vestiti e altri materiali se vengono in contatto con essi.

### PER I MIGLIORI RISULTATI:

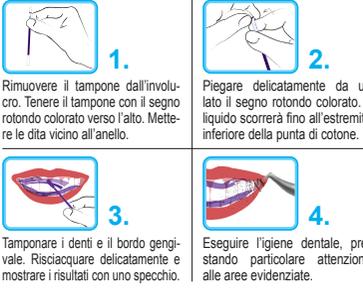

### DE Zweifarbige Plaque-Indikatorstäbchen Snap -n- go™

Jedes Clean&White Reveal Snap -n- Go Plaque-Indikatorstäbchen enthält einen Farbstoff, der an Plaque auf Zähnen und Zahnfleisch haftet. Dies ist ein nützliches Instrument zur Verbesserung der professionellen Zahnhygiene, indem es die Erkennung und Entfernung des Biofilms unterstützt. Es ist für den Zahnarzt SAUBER und EINFACH zu verwenden und stellt in der Zahnarztpraxis eine perfekte Ergänzung zu den Anweisungen in puncto Zahnpflege dar. ANWENDUNG: Bevor mit der professionellen Zahnhygiene begonnen wird, Clean&White Reveal auf den Zähnen auftragen, hierzu den Tupfer an Zähnen und Zahnfleisch entlang tupfen. 10 Sekunden lang einwirken lassen. Vorsichtig mit Wasser ausspülen. Die Zähne auf blau und rötlich-rosa erscheinende Bereiche untersuchen. Blaue Bereiche zeigen an, wo alte Plaque vorhanden ist und rötlich-rosa Bereiche zeigen das Vorhandensein von neuer Plaque an. Clean&White Reveal wird als Unterstützung zur Entfernung von Plaque mit der Spitze des Scalers und des Pulverstrahlgeräts verwendet. ACHTUNG: Kinder im Alter von 6 Jahren oder jünger dürfen die Prozedur nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen vornehmen. Nur für den zahnärztlichen Gebrauch. Nicht verschlucken. Reveal enthält rote und blaue Farbstoffe, die bei Kontakt mit Kleidung und anderen Materialien Flecken verursachen können.


### FÜR EIN BESTMÖGLICHES ERGEBNIS



### FR Tampons révélateurs de plaque à deux teintes Snap -n- go™

Chaque tampon Clean&White Reveal Snap -n- Go contient un colorant révélateur qui se fixe à la plaque des dents et des gencives. Il s'agit d'un instrument utile pour améliorer l'hygiène dentaire professionnelle car il permet d'identifier et d'éliminer le biofilm. PROPRE et FACILE à appliquer pour le dentiste. Un complément idéal pour l'hygiène orale en cabinet dentaire. MODE D'EMPLOI : Avant d'entamer la procédure d'hygiène dentaire professionnelle, appliquer Clean&White Reveal sur les dents en tapotant le long des dents et des gencives. Laisser poser 10 secondes. Rincer délicatement à l'eau. Examiner les dents afin d'identifier les zones bleues et roses ou rosâtres. Les zones bleues indiquent la présence de plaque ancienne, et les zones roses ou rosâtres indiquent une plaque récente. Ce produit permet de guider l'élimination de la plaque à l'aide de l'insert sonore et de poudres pour l'aéropolissage. ATTENTION : les enfants de 6 ans ou moins ne doivent utiliser le tampon que sous le contrôle direct d'un adulte. À usage dentaire uniquement. Ne pas ingérer. Reveal contient des colorants rouges et bleus qui tachent les vêtements et le matériel en cas de contact.


### POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

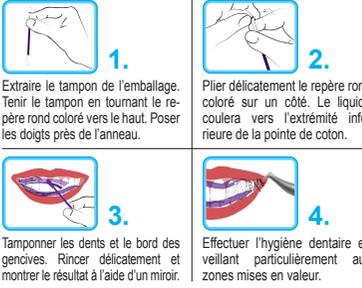

### PT Cotonetes para identificar placa de duas cores Snap -n- go™

Cada cotonete Clean&White Reveal Snap -n- Go contém um corante evidenciador que se adere à placa presente nos dentes e nas gengivas. Este é um instrumento útil para melhorar a higiene dentária profissional, auxiliando na identificação e na remoção do biofilme. LIMPO e FÁCIL de aplicar para o dentista. Um complemento perfeito para as instruções de higiene oral na clínica dentária. MODO DE USAR: Antes de iniciar a higiene dentária profissional, aplicar os dentes Clean&White Reveal, passando o cotonete nos dentes e nas gengivas. Aguardar 10 segundos. Enxaguar suavemente com água. Examinar as áreas dos dentes que aparecem na cor azul e rosa-avermelhada. As áreas na cor azul indicam presença de placa antiga e as áreas rosa-avermelhadas indicam a presença de uma nova placa. Use-o para auxiliar na remoção da placa com a ponta do ultrassom e as pós para aprofundar a ar. ATENÇÃO: crianças de idade igual ou inferior a 6 anos devem utilizar o somente sob a supervisão direta de um adulto. Somente para uso dentário. Não ingerir. Reveal contém corantes azuis e vermelhos, que podem manchar as roupas e outros materiais.


### PARA OS MELHORES RESULTADOS

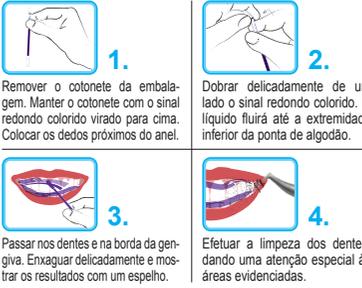

### NL Tweekleurige plakverklipper wattenstaafjes Snap -n- go™

Elk Clean&White Reveal Snap -n- Go wattenstaafje bevat een kleurstof die zich vasthecht aan tandplak op tanden en tandvlees. Dit is een nuttig hulpmiddel om de professionele tandhygië te verbeteren door het opsporen en verwijderen van biofilmvorming te ondersteunen. SCHOON en EENVOUDIG aan te brengen door de tandarts. Een perfecte aanvulling op de instructies voor mondhygië in de tandartspraktijk. GEBRUIKSANWIJZING: Gebruik Clean&White Reveal op de tanden voordat u begint met de professionele tandhygië, door het wattenstaafje langs de tanden en het tandvlees te deppen. Laat het 10 seconden inwerken. Spoeel voorzichtig af met water. Onderzoek de tanden op gebieden die er blauw en rozerood uitzien. De blauwe gebieden geven aan waar oude tandplak aanwezig is en de rozerood gebieden geven aan waar nieuwe tandplak aanwezig is. Gebruik het product om tandplak met de punt van het tandstempnaakje te verwijderen en de poeders voor de profylaxe met lucht. LET OP: Kinderen van 6 jaar of jonger mogen het product alleen onder direct toezicht van een volwassene gebruiken. Alleen voor tandkundig gebruik. Niet inslikken. Reveal bevat rode en blauwe kleurstoffen, die bij contact met kleding en andere materialen vlekken veroorzaken.


### VOOR DE BESTE RESULTATEN

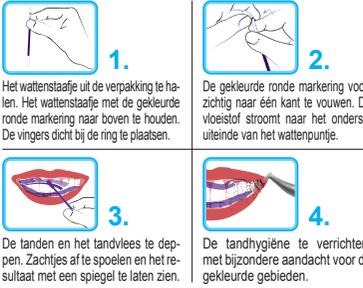

### DA Snap -n- go™ tofarvet plakvatpind

Clean&White Reveal Snap -n- Go vatpinde med indikatorfarve, der klæber til plak på tænder og tandkød. Dette er et nyttigt redskab til at forbedre tandlægeundersøgelsen ved at styre afsløring og fjernelse af biofilm. PRAKTISK og NEMT for tandlægen at påføre. Et perfekt supplement til vejledning i mundhygiejne på tandlægeklinikken. ANVENDELSE: For du går i gang med den professionelle tandhygiejne, skal du komme Clean&White Reveal-plak på tænderne ved at duppe vatpinden langs tænderne og tandkødet. Lad virke i 10 sekunder. Skyt forsigtigt med vand. Undersøg tænderne for områder, der ser blå og rød-pink ud. Blå områder angiver, hvor der er gammel plak, og rød-pink områder angiver forekomsten af ny plak. Brug dette til at styre plakkjernelse med tandstensspids og luftprofylaksepulver. BEMÆRK: Børn på 6 år og derunder bør kun bruge produktet under opsyn af en voksen. Må ikke knuges på tænderne. Må ikke indtages. Reveal indeholder røde og blå farvestoffer, som kan plette tøj og andre materialer ved kontakt.


### SÅDAN FÅS DE BEDSTE RESULTATER

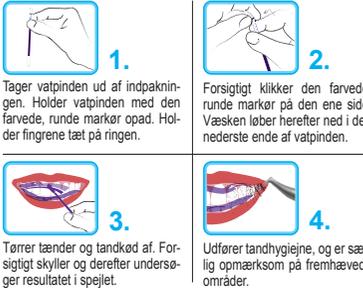

### FI Snap -n- go™ plakkiväripuikko

Jokainen ORALSAN Reveal Snap-n-Go Swab sisältää väriaineen, joka kiinnittyy plakkien hampaissa ja ikenissä. Tämä on hyödyllinen työkalu suuhygieniatutustumisen arvioimiseen. Vain paljasta alueet, joissa on tarvetta parantaa harjausta ja hammassavien puhdistusta. KÄTEVÄ ja HELPPOKÄYTTÖINEN suunhoito ammattilaiselle ja potilaalle. Täydellinen apuväline suuhygieniatyön opettamiseen vastaanotolla tai kotona. KÄYTTÖ: Harjaa hampaat huolellisesti ja puhdista hammassavilla hammassängälä, hammassiviharjalla tai silkkitiukilla. Levitä ORALSAN Reveal plakkiväriä hampaisiin taputtelemaalla vanupuikkoo hampaisiin ja ienrajoihin. Anna värin vaikuttaa 10 sekuntia. Huuhtelee varovasti vedellä. Tarkista mitkä alueet ovat värjättyneet punertavina vaaalempunaiksiksi. Nämä ovat alueita, joissa on plakkia ja joissa on tarvetta tarkempan hampaiden harjaukseen ja hammassavien puhdistukseen. VÄRITUS: 6-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset saavat käyttää tuotetta vain aikuisen suostuksessa valvonnassa. Vain hammassääteeliseen käyttöön. Älä niele. ORALSAN Reveal sisältää punaista väriainetta, joka harvavast vaahteita ja muita materiaaleja, jos se joutuu kosketuksiin niiden kanssa.

### PARHAAN TULOKSEN SAAVUTTAMISEKSI

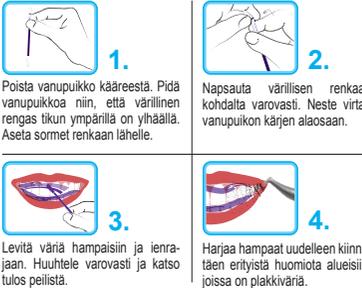


## NO Snap -n- go™ tofargede vattpinner til plakk

Clean&White Reveal Snap -n- Go vattpinner er tilsatt et fargestoff som festes seg til plakk på tenner og tannkjøtt. Dette er et nyttig hjelpe-middel til å påvise og fjerne biofilm og dermed forebygge den profesj-onelle tannhygienien.

**BRUKERVENNLIG** for tannlegen. Gir tydelige instruksjoner til munn-hygienien hos tannlegen.

**BRUK:** Forut for profesjonell tann-hygienie påføres Clean&White Reveal ved å gri vattpinner mot tennene og langs tannkjøttstranden. La produktet virke i 10 sekunder.

**FOR BEST RESULTAT** Skil unngår du å få fargestoffet på fingrene når du åpner vattpinnen:

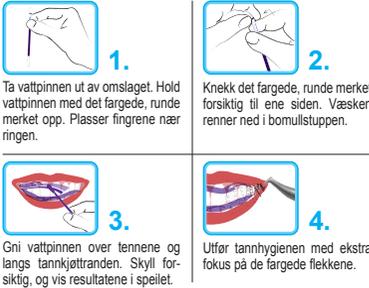

Ta vattpinnen ut av omslaget. Hold vattpinnen med det fargede, runde merket opp. Plasser fingrene nær ringen.

Knekk det fargede, runde merket forsiktig til ene siden. Væskeren renser ned i bomullstuppen.

Gni vattpinnen over tennene og langs tannkjøttstranden. Skyll forsiktig, og vis resultatene i speilet.

Utfør tannhygienien med ekstra fokus på de fargede flekkene.

## HU Snap -n- go™ kéttönüsü lepedékfeltároló tamponok

Minden egyes Clean&White Reveal Snap-n-Go tampon egy fogszívfestéket tartalmaz, amely a plakot és az inyen lévő lepedékhöz tapad. Ez egy hasznos eszköz a professzionális fog-hygénia javításához, amely a biofilm felaradását eltávolítja.

A fogszázi szívkamérek számára tiszta és egyszerű a felhasználás.

Tökéletes megelőző és szájhigiénia óvatosságra, amely a biofilm felaradását eltávolítja.

**HASANALAT:** A professzionális fog-ápolás megkezdése előtt a Clean&White Reveal lepedékoldószert kenje a fogak és az iny menét elhelyezett tamponnal.

Hagyja, hogy 10 másodpercig a helyén

**A LEGJOBB EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN** Annak érdekében, hogy a tamponok felhárítása közben ne kerüljön festék az ujjaira, javasoljuk, hogy:



A fogszak és az inyvonalat kenje le. Óvatosan öblítse le, és mutassa meg az eredményeket a tükörben.

Végezze el a fogszázi higiénit, különös figyelmet fordítva a ki-emelt területekre.

## SV Snap-n-go™ bomullspinnar för plackdetektion med två färger

Varje Clean&White Reveal Snap-n-Go-pinne innehåller ett färgämne som fäster på plack på tänder och tandkött. Detta är ett användbart verktyg för att förbättra professionell tandhygien genom att upptäcka och avlägsna biofilm.

**SMIDIG** och **ENKEL** för tandläkaren och patienten att använda. Ett perfekt hjälpmedel till undervisning om munhygien på tandkärmmottagningen.

**ANVÄNDNING:** Innan du börjar med professionell tandhygien, applicera Clean&White Reveal plackdetektorer på tanderna genom att badda med pinnen längs tanderna och tandkötten. Låt sitta kvar i 10 sekunder. Skölj försiktigt med vatten. Un-

**FOR BÄSTA RESULTAT** För att undvika att få färg på fingrarna när du tar fram bomullspinnarna, gör så här:



Tar ut pinnen från förpackningen. Håll pinnen med den färgade runden markören uppåt. Placera fingrarna nära ringen.

Knäpp försiktigt till den färgade runden markören åt sidan. Vätskan flödar ner i bomullspinnens nedre ände.

Badda tänder och tandkött. Skölj försiktigt och undersök resultatet i spegeln.

Utför tandhygien och var särskilt uppmärksam på markerade områden.

## RO Tampono detectoare de plac bacteriana in doua tonuri de culoare Snap -n- go™

Fiecare tampon Clean&White Reveal Snap-n-Go contine un colorant evidentiator care se lepeste de placa de pe dintii si gingii. Acesta este un instrument util pentru identificarea ariilor de dentare profesionala, identificand placa bacteriana.

**CURAT** si **USOR** de aplicat de catre medicul dentist. O completare perfecta a instructiunilor de ingrijire orale din cabinetul stomatologic.

**MOD DE UTILIZARE** Inainte de a initia igiena dentara profesionala, aplicati Clean&White Reveal pe dintii, tamponand de-a lungul dintilor si gingiilor. Lasati in acestea pozitie timp de 10 secunde. Clatiti usor cu apa. Examinati

**PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE** Pentru a evita să vă murdăriți degetele cu vopsea atunci când deschideți pachetul, vă recomandăm să:



Scoateti tamponul din ambalaj. Tineti tamponul cu marcaraj rotund colorat in sus. Puneți degetele lângă inel.

Îndoți ușor semnul rotund colorat într-o parte. Lichidul va curge la capătul inferior al vârfului de bambuc.

Tamponați dintii de-a lungul gingiei. Clătiți din nou ușor și observați rezultatele cu o oglindă.

Efectuați igiena dentară, acor-dând o atenție deosebită zonelor evidențiate.

## PL Wymazówki dwutonowe Snap -n- go™ do wykrywania płytki nazębnej

Każda wymazówka ORALSAN PRO Reveal Snap -n- Go zawiera barwnik, który "przecriepia" się do płytki nazębnej. Wymazówki są narzędziem ułatwiającym wykonanie profesjonalnej higieny jamy ustnej, dzięki której łatwiej wykryć i usunąć zabarwiony biofilm. ZYSZTĘ LATWE w zastosowaniu dla stomatologa. Idealne jako uzupełnienie instruktażu higieny jamy ustnej w gabinecie stomatologicznym.

**SPOSOB UŻYCIA** Przed rozpoczęciem profesjonalnej higieny jamy ustnej nałóż Clean&White Reveal na zęby, przesu-wając wymazówkę wzdłuż zębów i dziąseł. Pozostaw na 10 sekund. Opłucz delikatnie wodą. Oceń zęby pod kątem obecności

**DŁA LEPSZYCH REZULTATÓW** Aby uniknąć zafarbowania palców podczas otwierania wymazówek, zaleca się następujące postępowanie:



Wymyj wymazówkę z opakowania. Trzymaj tak, aby kolorowy znacznik był u góry. Przesuń palce-bliko piersiencia.

Delikatnie zagnij część ze znacznikiem. Ciężca spłynie do dolnego końca zabarwienaj końcówki.

Posmaruj zęby i linię dziąseł, następnie delikatnie opłucz wodą i sprawdź rezultat w lustrze.

Przeprowadź higienę jamy ustnej, zwracając szczególną uwagę na wybarwione obszary na zębach.

## RU Двухцветный индикатор зубного налета Snap -n- go™

Каждый тампон Clean&White Reveal Snap -n- Go содержит индикаторный краситель, который связывается с налетом, имеющимся на зубах и деснах. За счет этого и цветовой индикации удаления биопленки он позволяет осуществлять профессиональную чистку зубов.

Для стоматолога и стоматолога-ливиниста это ГИГИЕНИЧНОЕ и ПРАКТИЧНОЕ средство удобно в применении. Служит отличной дополнением к профессиональному уходу за полостью рта в стоматологической клинике.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.** Перед тем как приступить к профессиональной чистке зубов, нанесите Clean&White Reveal на зубы, проведя тампоном по поверхности зубов и десен. Оставьте на 10 секунд. Осторожно ополосните водой.

**СОВЕТЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА.** Чтобы не испачкать пальцы при открытии тампонов, рекомендуем действовать в указанном ниже порядке:



Извлеките тампон из упаковки. Держите его так, чтобы цветная метка находилась сверху. Расположите пальцы рядом с кольцом.

Слегка наклоните в сторону цветную круглую метку. Жидкость достигнет до нижнего края ватной головки.

Проведите чистку зубов, уделяя особое внимание выделенным участкам.

Проведите гигиену полости рта, уделяя особое внимание выделенным участкам.

## CZ Dvoubarevné tampony Snap -n- go™ pro detekci plaku

Každý tampon Clean&White Reveal Snap -n- Go obsahuje indikační barvo, které se přichytí na zubní plak a dásně. Jedná se o užitečný nástroj pro zlepšení profesionální dentální hygieny vedoucí k odhalení a odstranění biofilmu.

**PŘESNA** a **SNADNÁ** aplikace pro zubního lékaře. Ideální doplněk pro výkon ústní hygieny v zubní ordinaci.

**PŮLIŽITÍ:** Před zahájením profesionální dentální hygieny naneste přípravek Clean&White Reveal pro odhalování zubního plaku na zuby pomocí tamponu podél zubů a dásní. Nechte působit po dobu 10 sekund. Nechte opláchnout vodou. Prohlédne-

**PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY** Aby ste se vyhnuli pořísnění prstů barvivem při otvírání tamponů, doporučujeme:



Vyjmete tampon z obalu. Tampon držte barevným kulatým fixem nahoru. Položte prsty do blízkosti kroužku.

Vjměte tampon z obalu. Tampon držte barevným kulatým fixem nahoru. Položte prsty do blízkosti kroužku.

Střírejte zuby a linii dásní. Jemně opláchněte a ukaže výsledek v zrcadle.

Proveďte dentální hygienu a venčte zvláštní pozornost zvýrazněným oblastem.

## TR Snap -n- go™ iki tonlu diş plağı tespiti için sürüntü cubukları

Clean&White Reveal Snap -n- Go, dişler ve diş etleri üzerindeki plakla- rı yapışan bir belirteç boyası içerir. Bu, biofilm belirlenmesi ve çıkartılması yönlendiren profesyonel diş hijyenini iyileştirmek için faydalı bir araçtır. Diş hekimi için TEMİZ ve KOLAY uygulama. Diş muayene- hanesinde ağız hijyeninin gerektiği gibi yapılması için mükemmel bir taramalıdır.

**KULLANIM SEKİLİ:** Profesyonel diş hijyenine başlamadan önce, sürüntü cubuğunu dişler ve diş etleri boyunca geçirin Clean&White Reveal uygulayın. 10 sani-

**DAH İYİ SONUÇLAR İÇİN** Sürüntü cubuklarını açarken parmaklarınızın boyaıyla kirlenmesinden kaçınmak için aşağıdaki önerileri:



Sürüntü cubuğunu ambalajından çıkartın. Sürüntü cubuğunu renkli uyarıtağ isaret yukarıya bakacak şekilde tutun. Parmaklarınız halkaya yakın şekilde konumlandırın.

Sürüntü cubuğunu dişler ve diş eti çizgi-sinin üzerinde geçirin. Nazik şekilde du- rulum ve sonucriları bir ayna le gösterin.

Renkli uyarıtağ isareti nazik şekilde bir tarafa katlayın. Sni, parmağın ucunun alt ucuna kadar akacaktır.


Vurgulanmış alanları özel dikkat göstererek diş hijyenini uygulayın.

## SK Snap -n- go™ dvojtónové tampony na detekciu zubného povlaku

Každý tampon Clean&White Reveal Snap -n- Go obsahuje indikační barvo, které se přichytí na zubný povlak a dásně. Ide o užitočný nástroj na zlepšenie profesionálnej dentálnej hygieny usmerňujúcej odhalovanie a odstránenie biofilmu. NENÁROČNÉ A JEDNODUCHÉ použite pre zubného lekára. Ideálny doplnok pre výkon ústnej hygieny v zubnej ambulancii.

**PŮLIŽITIE:** Pred začatím profesj-onálnej dentálnej hygieny naneste Clean&White Reveal prostriedok na odhalo-vanie zubného povlaku na zuby tak, že ho nasiete na tampon pozdĺž zubov a dásien. Nechajte pôsobiť 10 sekund. Jemne opláchnite vodou. Preskúmajte

**PRE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY** Aby ste sa vyhnili tomu, že sa vám pri otváraní tamponov dostane farbivo na prsty, odporúčame vám, aby ste:

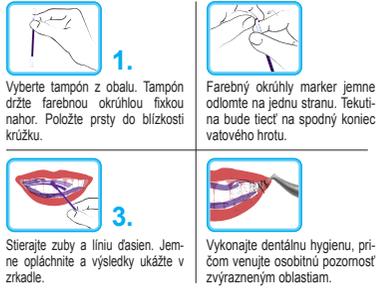

Vyberte tampon z obalu. Tampon držte farebným okrúhlym fixkou nahor. Položte prsty do blízkosti kružku.

Farebný okrúhly marker jemne odotme na jednu stranu. Tekutina bude liect na spodný koniec vatového hrotu.

Stierajte zuby a líniu dásien. Jemne opláchnite a výsledky ukažete v zrkadle.

Vykonajte dentálnu hygienu, pričom venujte osobitnú pozornosť zvýrazneným oblastiam.

## AR Masحات الكشف عن اللويحات السنية بدرجتى لون Snap -n- go™

تحتوي كل ماسحة من Clean&White Reveal Snap -n- Go على صبغة تميز لتتصق باللويحة السنية (البلاك) على الأسنان واللثة. قد هذه أداة مفيدة لخطفة نظافة الأسنان الهيمية مع توجيه الكشف عن الوبوطم (القضاء الحيوي الريق) والرائحة.

إياداً لطيفة وسهلة الاستعمال من جانب طبيب الأسنان. تمنح ملمس ممتاز لتطبيقات العناية باللم في عيادة الأسنان.

**طريقة الاستخدام:** قبل البدء في العناية الإضافية بالأسنان، مع ماسحة أورالسان ريفيل برو (Clean&White Reveal) على الأسنان، واربت الماسحة على الأسنان واللثة. تركت تتفاعل لمدة 10 ثوانٍ. ثم تخطيط الفم بلفظ بالماء، لفحص الأسنان بحثاً عن المناطق التي تظهر باللون الأزرق والوردي المائل إلى الرمعة.

تشر المناطق الزرقاء إلى مكان وجود اللويحة السنية (البلاك) القديمة والمناطق الوردية المائلة إلى الحمرة إلى وجود لويحة سنية (بلاك) جديدة. تستعمل المنتج توجيه إلى إزالة اللويحة السنية (البلاك) بطرف أداة الكشط ومساحيق الوقاية المستخدمة باليوا.

تيمية؛ يجب ألا يستعمل الأطفال الذين يبلغ أعمارهم 6 سنوات أو أقل للمنتج إلا تحت الإشراف المباشر للبالغين. لا تضع الماسحة على الأسنان لفترات طويلة. تجنب وضع المنتج متتج Reveal على أسطح صمراء وزرقاء، تتلف الماسحة وغيرها من المواد إلا لامتصاص الماسحة.

**لحصول على أفضل النتائج** لتجنب اسحاق أصابعك بالصبغة عند فتح الماسحات، نوصيك بما يلي:



قم بإزالة الماسحة من العبوة. امسك الماسحة من الغلاف. امسك الماسحة من الغلاف. امسك الماسحة من الغلاف.

قم بإزالة الماسحة من العبوة. امسك الماسحة من الغلاف. امسك الماسحة من الغلاف. امسك الماسحة من الغلاف.

قم بزيادة الماسحة من الغلاف. امسك الماسحة من الغلاف. امسك الماسحة من الغلاف. امسك الماسحة من الغلاف.

قم بزيادة الماسحة من الغلاف. امسك الماسحة من الغلاف. امسك الماسحة من الغلاف. امسك الماسحة من الغلاف.

رتب على الأسنان وارتب وصافة اللثة. امسك الماسحة بطرف المناطق المحددة.

رتب على الأسنان وارتب وصافة اللثة. امسك الماسحة بطرف المناطق المحددة.