



**BLANCONE<sup>®</sup>**

**Bělení  
zubů  
dostupné  
pro všechny**

**#IDS**



# BlancOne®: Nový milník v bělení zubu


Systémy BlancOne® jsou výsledkem 15letého výzkumu, který vedl k novému přístupu k bělení zubů, a to na základě vývoje nových světelně chemických technologií.

To, že světlo vyzařované stomatologickými lampami nezvyšuje účinnost peroxidů používaných při bělení a jen mírně urychluje reakci díky teplu přenášenému do gelu, je dobře známým faktem.

Fotochemické gely **BlancOne®** obsahují kromě peroxidu navíc **dvě speciální složky**, které jej umí rozložit tak **účinným způsobem a rychlostí, které nelze dosáhnout chemickými reakcemi tradičních bělicích systémů**.


- **FOTOSENZIBILIZÁTORY**, speciální barevné prostředky, které **využívají fotony** vyzařované lampou se specifickými vlnovými délkami a **dosahují „aktivního stavu“** přenášejícího na celý systém značné množství energie.
- **KATALYZÁTORY**, které tuto energii syntetizují a **spouštějí sérii řetězových reakcí** výrazně urychlujících rozklad peroxidů.

Tento „výbušný“ mechanismus energie umí vytvořit, během několika minut, odlišný druh kyslíku: **SINGLETOVÝ KYSLÍK**, atomovou formu kyslíku bez volných radikálů, schopnou provádět oxidační účinek mnohem rychleji, hlouběji a bezpečněji, než je tomu v případě volných radikálů (ROS) vznikajících u tradičních bělicích systémů.

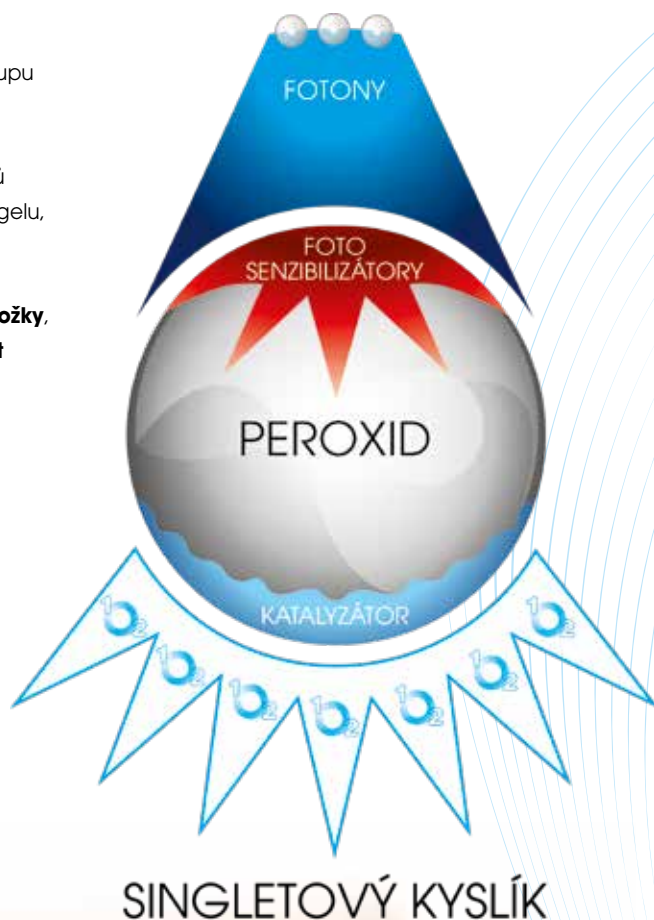

# BlancOne® CLICK: Systém bělení zubů, který může zcela změnit vaši práci

Inovativní technologie BlancOne® umožnila vyvinout systém BlancOne® CLICK, revoluční a unikátní bělení zubů, které je rychlé a lze jej kombinovat s dentální hygienou.

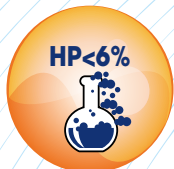

## Účinný při nízkých koncentracích

Poprvé jsme vyrobili bělení pro zubní ordinace účinné i při nízkých koncentracích peroxidu vodíku (<6%), které je v souladu s Evropskou směrnicí 84/2011, nejmodernějšími směrnicemi pro bezpečnost spotřebitelů.



## Žádná ochrana gingivy

Vyvinuli jsme jediné bělení pro zubní ordinace, u kterého není nutná ochrana sliznic, čímž odpadá nejnáročnější část procedury, kterou tak lze provést komukoli jednoduchým a bezpečným způsobem.



## Účinný během pouhých 10 minut

Díky fotochemické technologii BlancOne® je extrémně urychlen rozklad 16% karbamid peroxidu, který normálně trvá hodiny, na několik minut.

Ošetření je mnohem rychlejší a pohodlnější a lze jej kombinovat s dentální hygienou.



## Žádná bolest nebo citlivost

Díky velice rychlému účinku jsou všechny systémy BlancOne® pro zubní ordinace neagresivní a nedehydrují sklovinu, tedy nevyvolávají bolest ani citlivost. Ve skutečnosti to jsou jediné systémy na trhu, které neobsahují znečítlivující a remineralizační prostředky.









## Dostupné a opakovatelné

Díky krátkým ošetřením a nízké ceně je možné nabízet BlancOne® CLICK za cenu, která je dostupná všem.

Ideální pro první zkušenost s bělením, které lze pravidelně opakovat anou k intenzivnějším metodám bělení.



# Bělení Portfolio

	Typ ošetření	Aktivní princip	Standardní protokol	Typická účinnost	Doporučená frekvence
<b>V ZUBNÍ ORDINACI</b>	Rychlé bělení zubů 	Karbamid peroxid 16 % (HP 5,6 %)	1 aplikace v délce 10 minut*	4/5 odstínů	4/6 x za rok
	Intenzivní bělení zubů 	Karbamid peroxid 16 % (HP 5,6 %)	3 aplikace v délce 8 minut*	6/7 odstínů	1/2 x za rok
		Lékařské bělení v zubní ordinaci	Peroxid vodíku 35%	3-4 aplikace v délce 8 minut*	až 10 odstínů
<b>DOMÁCÍ POUŽITÍ</b>		Karbamid peroxid 16 % (HP 5,6 %)	2-3 hodiny denně po dobu 1/2 týdnů	1 týden 4/5 odstínů	1 týden 2/4 x za rok
		Karbamid peroxid 10 % (HP 3,5 %)	2-3 hodiny denně po dobu 1/2 týdnů	2 týdny 6/7 odstínů	2 týdny 1/2 x ročně
	údržbová péče 	3měsíční údržbový program	Karbamid peroxid 16 % (HP 5,6 %)	Tyčinka na 4 týdny** Duetto: každodenní použití	1/2 odstíny

\* světelná aktivace lampou pro bělení Arcus

\*\* 2 první týdny první měsíc + 1 týden následující měsíc

## BLANCONE®

[www.blancone.eu/cz](http://www.blancone.eu/cz)  
[beleni@blancone.cz](mailto:beleni@blancone.cz)



**Blanc Dental SE**

Křižovnická 86/6

Praha 110 00

tel.: +420 723 616 888

email: [beleni@blancone.cz](mailto:beleni@blancone.cz)

[www.blancone.eu/cz](http://www.blancone.eu/cz)

BlancOne je registrovaná obchodní značka IDS Spa

Rev 7 - 4/4/22



# Vše začíná se systémem **CLICK**

S obvyklým zlepšením o **4-5 odstínů bílé\***, cenou pro pacienta ve výši **několika málo eur** a pohodlným **ošetřením trvajícím jen několik minut**, je systém BlancOne® CLICK novou koncepcí bělení, která je **IDEÁLNÍM** startovním bodem, který umožní každému okamžitou zkušenost s bělejší a zářivější úsměvem.

- ✓ **IDEÁLNÍ pro seznámení se s bělením**
- ✓ **IDEÁLNÍ pro ty, kdo mají omezený rozpočet**
- ✓ **IDEÁLNÍ k zakončení každé dentální hygieny**
- ✓ **IDEÁLNÍ k propagačnímu marketingu ordinace**

S více než 100000 ošetření provedených v loňském roce jen v Itálii a indexem spokojenosti pacientů 4,5 z 5, se systém BlancOne® CLICK již stal **volbou číslo jedna zubních lékařů a pacientů!**

\* Odstíny posuzované podle klasického vzorníku Vita Classic upraveného pro bělení. Údaje shromážděny na základě 10956 případů zaznamenaných díky aplikaci BlancOne® PRO.



Nyní vám poprvé  
můžeme nabídnout  
**radost z nového úsměvu,**  
bělejšího  
a zářivějšího,  
**po každé dentální hygieně.**

Objevte program

**BLANCONE**  
**Clean&White**  
Dentální hygiena & bělení zubů



[www.blancone.eu/pro/cleanandwhite](http://www.blancone.eu/pro/cleanandwhite)

# Jak dosáhnout nejlepších výsledků u úsměvů vašich pacientů

Poté, co své pacienty překvapíte s BlancOne® CLICK, můžete jim ukázat, jak lze dosáhnout ještě překvapivějších a trvalejších výsledků.

Podle jejich preferencí, rozpočtu a ochoty ke spolupráci jim můžete nabídnout 4 různé strategie:

CLICK

## Opakování

ošetření systémem CLICK každých 3 až 6 měsíců

Systém BlancOne® CLICK je **velice šetrné ošetření**, které **může podstoupit každý** a je **jej možné často opakovat**.

Je to ideální doplněk ke každé dentální hygieně.



TOUCH

## Zlepšení

výsledku díky intenzivnímu bělení pomocí systému TOUCH

Systém BlancOne® TOUCH je **intenzivní verzí systému CLICK** spočívající ve 3-4 aplikacích během jedné návštěvy. **Jedná se o šetrné a účinné bělení**, které může vést k **hlubšímu a trvalejšímu odstínu bílé**.



HOME

## Zkombinování

s domácím bělením HOME

Dojde ke zkombinování **rychlosti systému CLICK, TOUCH, ULTRA a lepších výsledků s větší stabilitou** našeho systému pro domácí bělení s nosiči. Systém HOME je k dostání **ve dvou verzích: DAY (na 2 hodiny) a NIGHT (přes noc)**.



RITUALS

## Údržování

s řadou RITUALS

Řada produktů BlancOne® RITUALS sestává z **řady výrobků pro váš úsměv** a lze ji kombinovat s jakýmkoli ordináčním ošetřením, aby se udržely jeho výsledky.

Naše produkty Rituals obsahují:

- **DUETTO ACTIVE a DUETTO CARE gelová zubní pasta.**
- **Bělící pero BlancOne® STICK**
- **Náš bělící zubní kartáček BlancOne® BRUSH**
- **BlancOne® LIPS, balzámy na rty**

Tyto výrobky jsou k dostání jak samostatně i v rámci boxu Rituals, pro 3měsíční udržovací program.



ULTRA+

## Lékařské bělení zubů

**Pro obtížné případy a náročné pacienty**, zahrnuje řada BlancOne® ULTRA, **lékařské ošetření s fotochemickou aktivací, 35% peroxidem vodíku**.

Vhodné pro výrazné **diskolorace**, jako jsou tetracyklinové skvrny a neživé zuby, ULTRA vyžaduje použití gingiválních bariér.

Umožňuje až 4 krátké cykly během jednoho sezení. k dosažení skutečně překvapivých výsledků bez citlivosti zubů.

Použití BlancOne® ULTRA je lékařských ošetření (směrnice EU 93/42). V některých zemích EU může být použití omezeno místními předpisy.



V ORDINACI

DOMA

# Fotoaktivační lampa

## BlancOne® ARCUS

Technologická inovace BlancOne® je možná také díky exkluzivní lampě

BlancOne® ARCUS, která **přináší několik výhod:**

- **Ošetření BlancOne® bylo koncipováno pro špičkový výkon s lampou BlancOne® Arcus**
- 10 výkonných 5wattových led světel zaručuje **špičkovou účinnost a rychlé časy** uvedené v protokolech BlancOne®.
- Široký oblouk a umístění led diod až k jeho okrajům zaručují **úplnou aktivaci gelu na celém zubním oblouku** včetně stran.


BlancOne® ARCUS je k dispozici ve dvou verzích:  
mobilní na kolečkách  
nebo k upevnění na stomatologické jednotky.



## Aplikace BlancOne® PRO: výkonný nástroj

### Zlepšení profesionálního přístupu ke každému ošetření

- Jednoduchým a rychlým způsobem budete moci zaznamenat každého pacienta\*\* a návyky, které by mohly snížit účinnost ošetření.
- Jednoduchým a rychlým způsobem budete moci ukázat, jak moc lze zlepšit jejich odstín bílé barvy.
- Pořízením fotografií před a po ošetření budete moci okamžitě ukázat výsledek provedeného ošetření.
- Na konci ošetření aplikace navrhne kdy je třeba naplánovat kontrolní návštěvu.
- Aplikace pacientům připomene, díky automatickému e-mailu, kdy se mají objednat na další návštěvu k rozzáření úsměvu.
- Každý pacient má k dispozici dedikovanou sekci, kde nalezne veškeré informace a fotografie před a po bělení.

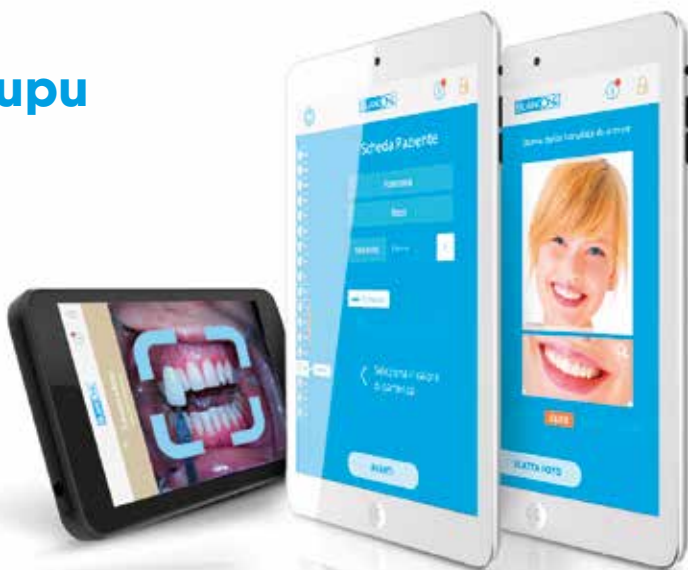

Aplikace je zdarma a vaše ordinace získá přidanou hodnotu díky každému ošetření BlancOne®, ve skutečnosti před každým ošetřením najdete v každé sadě BlancOne® QR kód a jeho načtením získáte:

- získáte **kredity pro získání propagačních materiálů pro vaši ordinaci zdarma**
- Zvýšíte povědomí a **viditelnost své ordinace** na veřejných stránkách [blancone.eu](http://blancone.eu), a [blancone.cz](http://blancone.cz)
- **Získáte loajalitu vašich pacientů**, čímž se zvýší počet ošetření



\*\* Veškerá data nashromážděná aplikací BlancOne Pro jsou zpracovávána dle všech regulí GDPR Evropské Unie, týkajících ochrany osobních údajů.



# Staňte se centrem BlancOne®

## Dokonalé bělení zubů

Pro pacienty neznámá BlancOne® pouze inovativní a bezpečné bělení, ale bezpečnost zaručuje také jeho provádění v autorizovaném centru tak, jak stanoví Evropská směrnice týkající se bělení zubů. Centry BlancOne jsou zubní ordinace specializující se na bělení zubů, které jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi a nástroji, a zaručují každému pacientovi plně uspokojivý zážitek.

Kromě aplikace BlancOne® PRO mají centra BlancOne Centres několik výhod:

- **Marketingové nástroje**, které vám pomohou bělení propagovat.
- **Vyhrazený prostor** s nástroji, které vám pomohou vaše centrum rozvíjet.
- **Reklamní akce určené vaši pacientům**, věrnostní program White for Life a iniciativa Open Day.
- **Můžete se připojit k sociálním sítím a webovým stránkám** a získat tak mnoho nových pacientů.
- **Mapa autorizovaných center** umožní novým pacientům vás nalézt.

Jako autorizované centrum BlancOne budete mít přístup k nejvhodnějším komunikačním nástrojům, **kteří vám pomohou bělení propagovat.**

Můžete dostávat zdarma všechny marketingové a propagační materiály, a to díky kreditům získaným prostřednictvím aplikace BlancOne PRO.



## Noví pacienti Vás již hledají...

Stát se centrem BlancOne® je snadné a zdarma.

Můžete se hned registrovat v odborném online prostoru nebo si stáhnout aplikaci BlancOne®

