

A young woman with voluminous, curly brown hair is smiling broadly, showing her teeth. She is wearing a bright orange, textured knit sweater. Her hands are clasped near her chin. The background is a solid, warm orange color.

CLICK

Click your smile

**Illumina il tuo sorriso
in 10 minuti**

BLANCCONE[®]

Il tuo sbiancamento dentale

Sbiancamento dei denti alla velocità della luce

Il team di ricerca che ha sviluppato le tecnologie BlancOne® vanta oltre 130 domande e 30 brevetti nel campo della fotochimica, fotodinamica e bio-fotonica.

Questa competenza e un costante impegno di R&S hanno portato a **nuovi paradigmi nello sbiancamento dentale**.


Attraverso la **fotochimica** è possibile accedere a ad elevati stati energetici, in grado di **superare barriere** di attivazione **invalidabili** dalla chimica impiegata **dai sistemi di sbiancamento dei denti convenzionali**.

La terza generazione della tecnologia LightSpeed ha raggiunto **un'efficacia mai vista prima**.

Irradiati dalla potente lampada ARCUS, i nuovi foto-booster BlancOne® vengono sovraeccitati dai fotoni, accumulando ancora più energia per scindere il perossido di idrogeno.

Oltre ai radicali liberi rilasciati dai sistemi di sbiancamento convenzionali, la tecnologia LightSpeed produce **ossigeno singoletto**, una forma atomica non radicale di ossigeno, per **un'azione sbiancante molto più rapida, profonda e sicura**, che continuerà fino a 72 ore.

Il perossido di idrogeno impiega 45 minuti per rilasciare il suo massimo potere ossidante, il perossido di carbamide necessita 4 ore. I gel fotochimici BlancOne® **agiscono in pochi minuti prevenendo l'aggressione e la disidratazione dello smalto e la sensibilità dentale**.

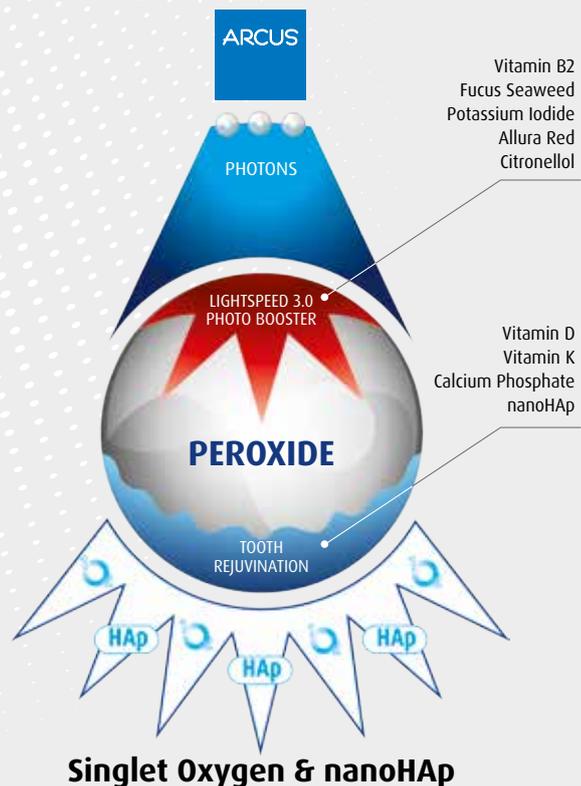

Gel applicato

Dopo 3 minuti

Dopo 5 minuti



Video
BlancOne®

Denti più forti e luminosi con Tooth Rejuvenation

Molti pazienti e professionisti evitano **lo sbiancamento dentale**, a causa degli **effetti collaterali**. Un elevata percentuale di perossido d'idrogeno o lunghi tempi di contatto, inducono una significativa **demineralizzazione** che indebolisce lo smalto e induce **ipersensibilità dentale**.

La **tecnologia LightSpeed BlancOne®** ha reso lo sbiancamento dentale efficace a prescindere dall'impiego di elevate percentuali di perossidi e lunghi tempi di contatto, minimizzando così gli effetti collaterali e rendendo lo **sbiancamento più confortevole e sicuro**.

Ora, grazie alla **nuova tecnologia Tooth Rejuvenation**, i trattamenti BlancOne® offrono un **doppio beneficio**: l'incremento della **luminosità dentale** e la **ristrutturazione dello smalto** con nano idrossiapatite, un vero e proprio trattamento di ringiovanimento dello smalto.


La tecnologia Tooth Rejuvenation utilizza un meccanismo sinergico in cui l'azione ossidativa del perossido attiva un **booster vitaminico** in grado di generare uno **straordinario ambiente rigenerativo** amplificando notevolmente l'efficacia delle **nanoparticelle d'idrossiapatite**.



La nano HAp BlancOne® ha una **dimensione 1000 volte più piccola** rispetto all'idrossiapatite comunemente utilizzata ed è **l'unica nano idrossiapatite approvata in Europa** per l'utilizzo nei prodotti oral care.

Le nano particelle dell'idrossiapatite BlancOne® **penetrano facilmente nei tubuli dentinali esposti e nelle microfratture dello smalto**, la sua struttura è analoga a quella presente naturalmente nello smalto favorendo il legame a livello ionico.

La tecnologia Tooth Rejuvenation attiva gli ioni Ca, P e le nano particelle minerali stimolando un **processo di deposizione forzata e adesione alla struttura dentale**, producendo una straordinaria **azione protettiva, ristrutturante e desensibilizzante, aumentando la luminosità dentale** grazie al biomimetismo dell'idrossiapatite.

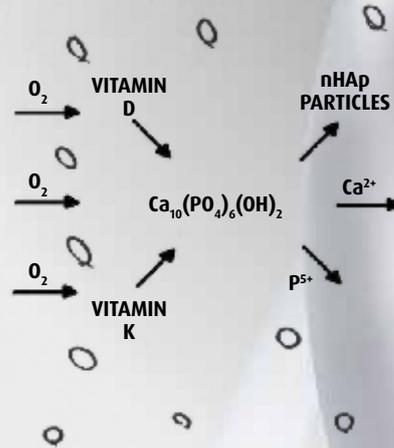

BlancOne® CLICK: il trattamento che cambierà per sempre la vostra pratica

L'innovativa tecnologia BlancOne® ha consentito lo sviluppo di BlancOne® CLICK+, un rivoluzionario e unico trattamento sbiancante veloce, abbinabile alla seduta di igiene dentale.



Efficace a basse concentrazioni

Per la prima volta abbiamo reso efficace lo sbiancamento in studio a bassa concentrazione di perossido d'idrogeno (<6%), a norma con la **Direttiva Europea 84/2011**, la più avanzata regolamentazione a tutela della sicurezza dei consumatori.



Senza protezione gengivale

Abbiamo creato **gli unici sbiancamenti in studio che non necessitano di protezione delle mucose**, eliminando il passaggio più delicato della **procedura** che può essere **eseguita in modo semplice e sicuro**.



Agisce in soli 10 minuti

Grazie alla tecnologia fotochimica BlancOne®, la scissione del perossido di carbamide al 17%, che normalmente richiede ore, viene iper accelerata in pochi minuti.

Il trattamento è molto più veloce e confortevole e può essere abbinato alla seduta d'igiene dentale.



Rinforza e protegge lo smalto

Grazie alla nano idrossiapatite e al sistema Tooth Rejuvenation, i trattamenti BlancOne® svolgono anche **un'efficace azione remineralizzante**, sbiancando il dente **senza indurre sensibilità ne disidratare lo smalto**.




Accessibile e ripetibile

Con sedute veloci e costo molto contenuto, BlancOne® CLICK può essere proposto ad un **prezzo accessibile a tutti**. Ideale per avvicinare allo sbiancamento, **può essere ripetuto frequentemente** e introdurre a trattamenti più intensivi.


Efficacia di sbiancamento

43.000 pazienti

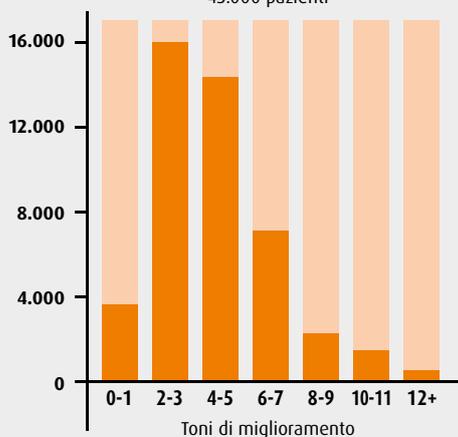

Indice di soddisfazione

2.100 pazienti

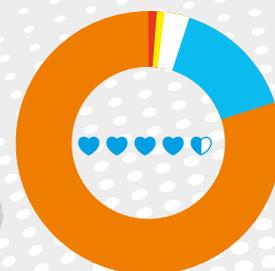

WOW!



WOW

Tutto comincia con un CLICK+

Con un **miglioramento tipico di 4-5 toni di bianco**,
un **costo contenuto** e una confortevole **seduta di pochi minuti**,
BlancOne® CLICK+ è un **trattamento di nuova concezione**,
il **punto di partenza IDEALE** pensato per consentire a tutti
di sperimentare l'esperienza di un sorriso immediatamente più bianco e luminoso

- ✓ **IDEALE** trattamento per **avvicinare lo sbiancamento**
- ✓ **IDEALE** per chi dispone di un **budget ridotto**
- ✓ **IDEALE** completamento di ogni seduta di **igiene dentale**
- ✓ **IDEALE** per il **marketing promozionale dello studio**

Con oltre 2 milioni di trattamenti svolti
e un indice di soddisfazione paziente
di 4,5 su 5,
BlancOne® CLICK+ si è già affermato
come **la scelta n.1 di dentisti e pazienti!**



**Ora per la prima
volta puoi regalare**
la gratificazione di un nuovo sorriso,
più bianco e luminoso
ad ogni seduta di igiene dentale.

Scopri il programma

BLANCONE
Clean&White
Igiene & Sbiancamento dentale



<https://cleanwhitepro.eu>



Scarica il catalogo Clean&White

Come ottenere il massimo per il sorriso dei tuoi pazienti

Dopo aver sorpreso i tuoi pazienti con BlancOne® CLICK+ potrai spiegargli come **ottenere un risultato ancora più eclatante e durevole nel tempo.**

In base alla loro preferenze, compliance e budget potrai proporrgli diverse 4 strategie:

CLICK+ Ripeti

il trattamento CLICK ogni 3-6 mesi

BlancOne® CLICK+ è un trattamento **ultra delicato**, ha un **costo alla portata di tutti** e **può quindi essere ripetuto frequentemente**. ideale compagno di ogni vostra seduta di igiene dentale.



TOUCH+ Potenza

il risultato con il trattamento intensivo TOUCH

BlancOne® TOUCH+ è un trattamento **cosmetico** basato su più applicazioni nella stessa seduta. **Uno sbiancamento delicato ed efficace** che è in grado di produrre **un bianco più profondo e durevole.**



HOME+ Combina

col trattamento domiciliare HOME+

Attraverso l'uso di mascherine domiciliari, potete combinare **l'immediatezza del CLICK+ con la durevolezza di BlancOne® HOME+.** HOME+ è disponibile **in tre versioni FAST** (diurno veloce), **NIGHT** (notturno) e **EVER** (notturno per mantenimento, denti sensibili e allineatori).



RITUALS Mantieni

attraverso la linea RITUALS

La linea di prodotti BlancOne® RITUALS racchiude una serie di prodotti dedicati alla **bellezza e alla salute quotidiana del sorriso** e può essere **abbinata a qualsiasi trattamento in studio per aumentarne e prolungarne il risultato.** I prodotti Rituals includono:

- I gel dentifrici DUETTO ACTIVE e DUETTO CARE
- La penna sbiancante BlancOne® STICK
- lo spazzolino smacchiante BlancOne® BRUSH
- I balsami per le labbra BlancOne® LIPS

Questi prodotti sono disponibili sia individualmente che all'interno del **cofanetto Rituals per un programma di mantenimento che dura 3 mesi.**



ULTRA+ Trattamento medicale delle discromie dentali

Per i casi più difficili ed i pazienti più esigenti la gamma BlancOne® include ULTRA+, un **trattamento medicale ad attivazione fotochimica, con perossido di idrogeno al 35%.** Adatto ad **affrontare le discromie più gravi**, come le macchie da tetraciclina e denti non vitali, ULTRA+ richiede la protezione gengivale e permette fino a 4 brevi cicli nella medesima seduta per raggiungere risultati davvero sorprendenti e senza sensibilità.



BlancOne® ULTRA+ è uno sbiancamento medicale (Direttiva 93/42/CEE). L'utilizzo può essere limitato dalle normative locali in alcuni paesi della EU.

IN STUDIO



A CASA

Dispositivo di fotoattivazione LED BlancOne® ARCUS PRO

I trattamenti sbiancanti BlancOne® sono stati concepiti come un sistema con il dispositivo di fotoattivazione LED BlancOne® Arcus PRO per garantire la massima efficacia e i tempi rapidi indicati dai protocolli BlancOne®.

- ✓ **Potente e preciso**, dotato di 10 moduli LED ad alta potenza per prestazioni superiori.
- ✓ **Lunghezza d'onda sicura:**
luce LED blu da 470nm, priva di UV e infrarossi per una sicurezza ottimale.
- ✓ **Programmi preimpostati** per BlancOne CLICK, TOUCH, ULTRA e Gingival Barrier.
- ✓ **Modalità di trattamento personalizzata:**
Rapida, Standard, Estesa o Denti Sensibili per una cura su misura.
- ✓ **Comodo Timer con funzione pausa**
per un controllo completo durante tutto il processo di sbiancamento.
- ✓ **Ampio arco LED** per l'attivazione completa del gel su tutta l'arcata dentale, lati inclusi.

BlancOne® ARCUS è disponibile in due versioni:
MOBILE su ruote
e FIXED con attacco per palo del riunito.

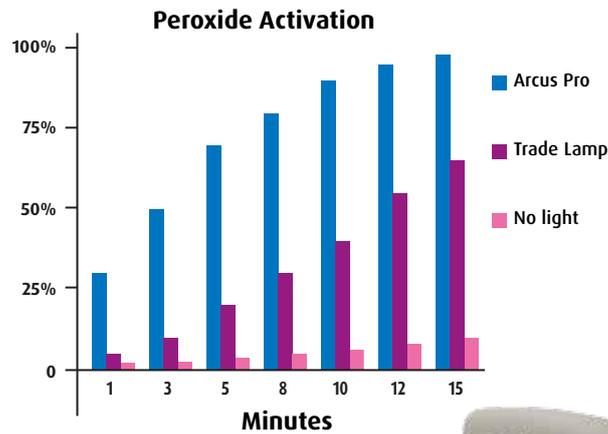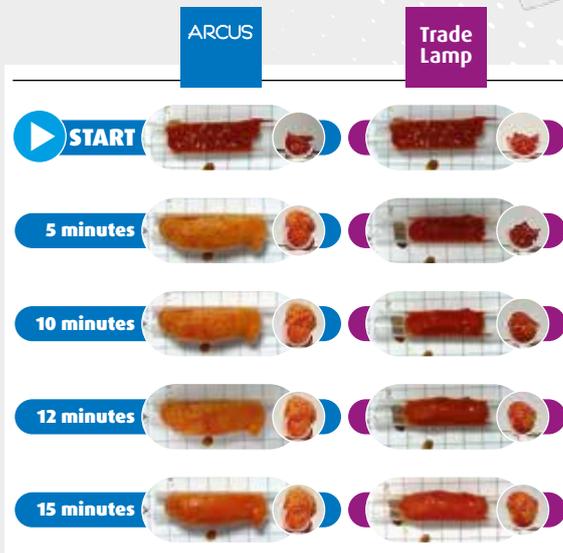

Ogni lampada ARCUS è fornita con il kit accessori BlancOne® CARE per garantire il massimo in comfort e comunicazione col paziente:

- ✓ 4 apribocca in morbido silicone con stop per la lingua e protezione labiale, assortiti in 4 misure S, M, L, XL.
- ✓ 60 protezioni facciali da agganciare agli apribocca per proteggere il viso del paziente da schizzi e luce.
- ✓ 1 siringa di protezione gengivale fotopolimerizzabile.
- ✓ 12 BlancOne® LIPS, balsamo per labbra 100% naturale in gusti assortiti per mantenere le labbra del paziente idratate.
- ✓ 1 VITA 3D Bleaching Guide, per misurare luminosità dentale prima e dopo il trattamento.
- ✓ 1 Specchio con LED per mostrare il risultato al paziente a fine trattamento.



	Tipologia	Indicazioni	Principi Attivi	Protocollo	Caratteristiche
IN STUDIO	Sbiancamento veloce 	In studio Veloce	CP 17% (HP 5.95%) nHAP 0.75% Booster Vitaminico	1 Ciclo da 10 minuti*	 Sbiancamento  Rimineralizzazione  Durata
	Sbiancamento intensivo 	In studio Cosmetico	HP 6% nHAP 0.75% Booster Vitaminico	3/4 Cicli da 8 minuti*	 Sbiancamento  Rimineralizzazione  Durata
		In studio Medicale	HP 35% nHAP 0.75% Booster Vitaminico	3 Cicli da 8 minuti*	 Sbiancamento  Rimineralizzazione  Durata
A CASA		Sbiancamento diurno Veloce	HP 6.0% nHAP 0.75% Booster Vitaminico Attivatore	10-15 applicazioni 45 minuti	 Sbiancamento  Rimineralizzazione  Durata
		Sbiancamento Notturmo Sbiancamento Endodontico	CP 12% (HP 4.2%) nHAP 0.75% Booster Vitaminico	10-15 applicazioni Notturmo	 Sbiancamento  Rimineralizzazione  Durata
		Allineatori ortodontici Denti sensibili Mantenimento	CP 7% (HP 2.4%) nHAP 1.5% Booster Vitaminico	10-15 applicazioni Notturmo	 Sbiancamento  Rimineralizzazione  Durata

* foto attivazione con lampada foto attivatrice BlancOne® Arcus - programma Fast

BLANCONE®

www.blancone.eu/pro

helpdesk@blancone.eu

 [blancone](#)  [blancone_ids](#)  [blancone](#)

 [blancone team pro](#) (gruppo professionale)



IDS Spa - Via San Cristoforo, 28/10 - 17100 Savona - Italia

Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865 - email: info@idsdental.it - www.idsdental.it