



Disinfezione

SUPERFICI

Pag **31**

MANI

Pag **36**

STRUMENTI

Pag **28**

VARIE

Pag **38**

Detergente e disinfettante sporicida,

delicato sul tuo strumentario

✓ Ampio spettro e veloci tempi d'azione

Grazie all'ACIDO PERACETICO,
il prodotto è **attivo in soli 5 minuti**
(diluizione al 2% o 4% per strumenti
particolarmente sporchi)

**su HIV, HCV, HBV, TBC, LEGIONELLA,
funghi, batteri e spore.**

✓ Disinfettante sporicida e detergente un solo veloce passaggio

Viroxid Instruments ha un **elevato potere detergente**,
in grado di eliminare completamente
la pulizia manuale.

Viroxid Instruments **può essere usato
in vasca ad ultrasuoni
o Multifisteril (TecnoGaz).**

✓ Economico

Viroxid Instruments
è una soluzione concentrata
che, diluita al 2%, consente di ottenere
50 lt di soluzione
per ogni fiasco da 1 litro.

Il prodotto diluito rimane
stabile per una settimana.

✓ Sicuro per lo strumentario

L'innovativa formulazione
di Viroxid Instruments contiene
antiossidante per proteggere
lo strumentario dalla corrosione
**anche se lasciato in immersione
per tutta la notte.**



Tempi di contatto

Tuberculicida, sporicida, virucida,
battericida, fungicida,
HIV, HBV, HCV.....5 minuti

Composizione:

De-ionised water, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,
3-diamine, Tetrasodium N,
N bis (Carboxylatomethyl)-L-glutamate,
Didecylidimethylammonium chloride, ethanol, C12-15 pareth-9,
Monoethanolamine, Potassium carbonate,
Benzotriazole, Peracetic acid.

Scadenza:

3 anni

Confezionamenti

CE 0546

070200

Viroxid INSTRUMENTS

3 fiasconi da 1 litro - concentrato (2-4%)

Web



Disinfettante, detergente concentrato per strumentario
**ad azione tuberculicida, battericida,
fungicida, virucida**

✓ **Disinfezione e detersione rapida in un solo passaggio**

Sporigerm® Ferri+ ha un **elevato potere detergente in grado di eliminare completamente la pulizia manuale** ed e' classificato detergente secondo la normativa CE 648/2004. Sporigerm® Ferri+ e' **attivo su HIV, HCV, HBV, TBC, funghi e batteri.**

✓ **Sicuro per lo strumentario**

La formulazione di Sporigerm® Ferri+ **contiene l'antiossidante per proteggere lo strumentario dalla corrosione** anche se lasciato in immersione per parecchie ore. Sporigerm® Ferri+ può essere **usato in vasca ad ultrasuoni.**

Tempi di contatto	Concentrazione	Tempi
Virus con involucro (HIV-HBV-HCV).....	15%	60 minuti
Batteri	5-10%	15 minuti
Funghi	1-15%	15 minuti
Virus senza involucro (Adenovirus).....	1%	60 minuti
Micobatteri	10%	60 minuti

Composizione

Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo, Alchilisochoinolina Bromuro, Eccipienti detergenti e acqua deionizzata q.b. a

Detergente conforme al regolamento **CE** n° 648/2004

Scadenza:

3 anni



DISINFEZIONE

Confezionamenti

CE 0546

502001
Sporigerm Ferri+
6 flaconi da 1000 ml con dosatore

Web



Disinfettante **sterilizzante a freddo**

✓ **Disinfettante ad ampio spettro**

Sporigerm® Peracetic Plus può essere utilizzato come disinfettante - sterilizzante a freddo per trattare lo strumentario sia in situazioni di particolare rischio. Infatti è attivo in 10 minuti su spore, HIV, HCV, HBV, TBC, funghi e batteri.

✓ **Sterilizzante a freddo delicato**

Sporigerm® Peracetic Plus è particolarmente indicato per sterilizzare a freddo quegli oggetti (es. fibre ottiche) che non possono essere sterilizzati in autoclave e per tutto lo strumentario delicato. Testato su metalli, gomme e materie plastiche. Può essere utilizzato per la detersione e disinfezione degli impianti d'aspirazione.

✓ **Stabile per 24 ore**

La soluzione con Sporigerm® Peracetic Plus è stabile per 24 ore dalla preparazione assicurando i tempi di contatto anche dopo molte ore ed indipendentemente dalla quantità di strumenti immersi.

✓ **Pratico**

Sporigerm® Peracetic Plus è facile da preparare, può essere utilizzato in vasca ad ultrasuoni, è compatto da stoccare, biodegradabile e smaltibile nella rete fognaria. 2 misurini ogni litro d'acqua con 1 Kg si ottengono 62,5 litri di soluzione.



Tempi di contatto

Sterilizzazione 10 minuti
HIV - HBV - HCV
Tuberculocida, sporicida, virucida,
battericida, fungicida.....5 minuti

Composizione 100 g di prodotto contengono:

Tetracetiletilendiamminag 24,800
Sodio Perborato Monoidratog 50,094
Coformulanti q.b. a.....g 100

Confezionamenti

CE 0546

502002

Sporigerm Peracetic Plus

1 Kg (2 barattoli da 500 g cad.)
1 misurino dosatore

Web



Disinfettante sporicida per superfici

Concentrato, inodore, senza alcool

✓ Disinfettante per superfici sporicida con veloci tempi d'azione

Viroxid offre una **copertura totale su tutte le forme microbiche comprese le spore.**

Sicurezza totale per gli operatori sanitari ed i pazienti dello studio.

Il prodotto è **attivo in soli 5 minuti su HIV, HCV, HBV, TB (Avium e Terrae), MRSA, funghi, batteri e spore** (diluizione 1,6%).

Viroxid è un ottimo detergente, **rimuove completamente la materia organica** compreso il sangue, anche se essiccato.

✓ Pratico e concentrato

Viroxid è confezionato in **cartucce concentrate** il cui contenuto è rilasciato automaticamente chiudendo il flacone contenente l'acqua.

Questo **sistema ergonomico brevettato**, consente un **utilizzo semplice ed un'elevata maneggevolezza**

da parte degli operatori sanitari.

Una volta diluito nel flacone nebulizzatore rimane attivo 12 mesi.

Il sistema concentrato a cartucce

consente un miglior stoccaggio

nello studio odontoiatrico.

Con un dispenser (Refil Pack),

che tenete comodamente

in una mano, potete ottenere

5 litri di soluzione diluita.



SICURO SU TUTTE LE SUPERFICI

Viroxid è "virtualmente" senz'alcol, una volta diluito la quantità di alcol è inferiore al 1%.

Può essere usato su tutti i tipi di superfici, comprese le seguenti:

- ✓ Vetro sicuro su tutti i tipi di vetro.
- ✓ Metallo compreso alluminio, acciaio inossidabile e acciaio rivestito.
- ✓ Plastica compreso PE (Polietilene), PP (Polipropilene), nylon e acrilici.
- ✓ Corian comprese altre superfici sintetiche.

Tempi di contatto

Tuberculocida, sporicida, virucida, battericida, fungicida, HIV, HBV, HCV5 minuti

Composizione:

La soluzione concentrata contiene tra gli altri componenti: Aqua, Benzalkonium Chloride, C12-14 Alkyl Ethylbenzylammonium Chloride, Didecylmethylammonium Chloride, Isopropyl Alcohol, C9-11 Pareth-8, Peracetic acid, PPG-2 Methyl Ether, Polyaminopropyl-Biguanide, Cocamidopropyl Betaine, Tetrasodium EDTA

Scadenza: 3 anni

Confezionamenti

CE 0546

070100 - Viroxid SPRAY - Starter kit

Dispenser da 500 ml con spruzzatore
10 cartucce da 8 ml (5 lt di soluzione)

070101 - Viroxid SPRAY - Refill Pack

10 cartucce da 8 ml (5 lt di soluzione)

070102 - Flacone + Trigger Spray

Web



Disinfettante detergente spray ad azione tubercolicida, battericida, fungicida, virucida

✓ Efficace ed inodore

Sporigerm® Spray+ è pronto all'uso, si nebulizza direttamente sulla superficie da trattare ed evapora rapidamente. La formulazione di Sporigerm® Spray+ **ha un basso contenuto alcolico ed è inodore**, pertanto non provoca irritazione alle vie respiratorie.

✓ Azione rapida e sicura

Sporigerm® Spray+ è testato come spray e, grazie ad un'elevata capacità coprente, agisce in modo completo ed **in soli 5 minuti su HIV, HCV, HBV, virus e batteri**.

✓ Disinfezione e detersione in un solo prodotto

Sporigerm® Spray+ ha un elevato potere detergente in grado di rimuovere completamente residui organici (sangue, saliva ed essudati) dalle superfici disinfettandole al contempo. Sporigerm® Spray+ **può essere utilizzato su ogni tipo di superficie incluse plastiche, gomme e pelle**.

Tempi di contatto

Virus con involucro (HIV-HBV-HCV).....	5 min
Batteri	5 min
Funghi (lieviti)	5 min
Virus senza involucro (Adenovirus)	5 min
Micobatterio Tubercolare (TBC)	60 min

Composizione

Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo, Alcoli isopropilico, etilico, tensioattivi, Isotiazolinone, Mg Cloruro, acqua depurata q. b. a

Scadenza:

3 anni

Efficacia a confronto

Test eseguito presso lo studio Federdent di Barbiano (RA)

che ha testato 4 diversi spray disinfettanti per superfici.

Dopo aver passato l'apposito tampone sulle superfici "disinfettate" secondo le istruzioni dei produttori, ecco i risultati dopo 5 giorni.

Sporigerm Spray è l'unico tampone che non presenta tracce di proliferazione di funghi e batteri.



Confezionamenti

CE 0546

501001
Sporigerm Spray+

12 flaconi da 750 ml + 4 nebulizzatori

Web



Fazzoletti disinfettanti detergenti ad azione tubercolicida, battericida, fungicida, virucida

✓ Pratico e rapido

Sporigerm® Fazzoletti+ è pronto all'uso basta passare il fazzoletto sulla superficie da trattare e lasciare agire per **5 minuti per eliminare HIV, HCV, HBV, virus e batteri**.
Il flow-pack con tappo di chiusura evita che i fazzoletti si seccino eliminando sigilli adesivi che si appiccicano ai guanti.

✓ Disinfezione e detersione in un solo prodotto

Sporigerm® Fazzoletti+ ha un **elevato potere detergente** in grado di rimuovere completamente residui organici (sangue, saliva ed essudati) dalle superfici disinfettandole al contempo.

✓ Prodotto con materiali di qualità

I fazzoletti Sporigerm® sono realizzati in TNT estremamente resistente e di ampie dimensioni (15,5 x 19 cm). Non si strappano ne si deformano.
Sporigerm® Fazzoletti+ **può essere utilizzato su ogni tipo di superficie incluse plastiche, gomme e pelle**.



Tempi di contatto

Virus con involucro (HIV-HBV-HCV).....	5 min
Batteri	5 min
Funghi (lieviti)	5 min
Virus senza involucro (Adenovirus)	5 min
Micobatterio Tubercolare (TBC)60 min

Composizione 100 g di prodotto contengono:

Benzalconio Cloruro	g 0,50
O.FenilFenolo	g 0,02
Alcoli isopropilico, etilico, tensioattivi,	
Isotiazolinone, Mg Cloruro, acqua depurata q. b. ag 100	

Scadenza:

3 anni

Confezionamenti


CE 0546

501002
Sporigerm Fazzoletti+
12 Flow Pack da 50 fazzoletti

Web



- ✓ Dimensioni: 19,50 x 16,50
- ✓ TNT a nido d'ape
Per una migliore rimozione dello sporco
- ✓ Molto resistente
- ✓ Consentono una pulizia su più superfici
- ✓ Molto imbibite
- ✓ Non si strappano
- ✓ Non si deformano

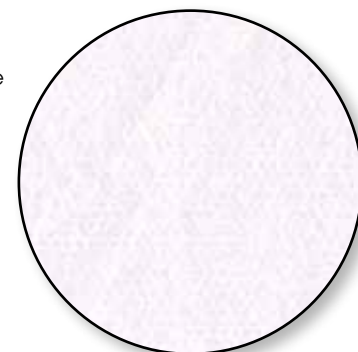

Disinfettante detergente **a base alcolica**✓ **Efficace ed economico**

SD10 è un disinfettante superficiale a base alcolica di PROPANOLO ed ETANOLO che sviluppano un'azione **Battericida, Fungicida, Tuberculocida e Virucida in 5 Minuti**. Consigliato in tutti i casi dove si vuole ottenere una **disinfezione efficace ad un costo contenuto**, utilizzabile su tutte le superfici non sensibili all'alcol.

✓ **Pratico e gradevole**

SD 10 è pronto all'uso, dotato di un flacone con impugnatura ergonomica. SD10 ha **un'ottima profumazione DentoMint** che lascia nell'ambulatorio una fresca fragranza di menta.

**Tempi di contatto**

HIV , HCV , TB (avium),
virucida, battericida, fungicida 5 minuti

Composizione:

Ethanol, Propan-2-ol,
Polymeric biguanide hydrochloride,
Disinfectants, Parfum, Linalool, Limonene

Scadenza:

3 anni

Confezionamenti

CE 0546

070510

SD 10 Alcohol Spray

5 flaconi da 1 lt - 1 nebulizzatore spray

Web

Fazzoletti disinfettanti **a base alcolica**

✓ Efficace ed economico

I fazzoletti SD20 a base alcolica di PROPANOLO ed ETANOLO sviluppano in **solì 5 minuti** un'azione **Battericida, Fungicida, Tuberculicida e Virucida**.

Indicati per la disinfezione superficiale in tutti i casi dove si vuole ottenere una **disinfezione efficace ad un costo contenuto**.

✓ Pratici e profumati

I fazzoletti SD 20 sono confezionati in **buste sigillate** e si mantengono sempre imbevuti, garantendo sempre **un'alta bagnabilità delle superfici trattate**.

Ogni confezione contiene un **pratico tubo dispenser**.

I fazzoletti SD 20 possono essere usati su tutte le superfici non sensibili all'alcool.

Sono **profumati con DentoMint** lasciando nell'ambulatorio una fresca fragranza di menta.

Tempi di contatto

HIV , HCV , TB (avium), virucida, battericida, fungicida..... 5 minuti

Composizione:

Ethanol, Propan-2-ol, Polymeric biguanide hydrochloride, Disinfectants, Parfum, Linalool, Limonene

Scadenza:

3 anni

Confezionamenti

CE 0546


070520

SD 20 Alcohol Wipes

12 buste da 100 fazzoletti (180x120)

1 dispenser (vuoto)

Web

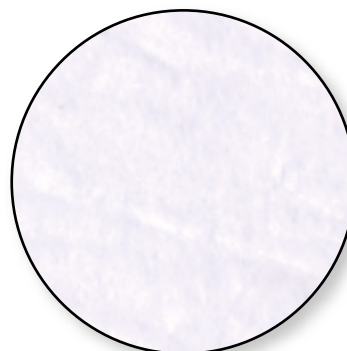

- ✓ Dimensioni: 18 x 11,50
- ✓ Molto imbevute per bagnare completamente la superficie da trattare
- ✓ Economiche 100 strappi

Sapone antisettico **per la disinfezione delle mani**



✓ **Detersione delicata**

Sporigerm® Mani ha lo stesso **PH della pelle** (5,5) ed è arricchito con glicerina per mantenere la pelle morbida rispettandone il manto lipidico anche in caso di lavaggi frequenti.

✓ **Azione disinfettante ad ampio spettro**

Sporigerm® Mani garantisce un'azione **disinfettante su batteri gram+ e gram-, funghi e virus.**

Sporigerm® Mani è un Presidio Medico Chirurgico registrato presso il Ministero della Salute.

✓ **Antisettico**

L'azione antisettica di Sporigerm® Mani **previene le infezioni sulla cute**

integrata mantenendo una costante azione sulla flora microbica cutanea.



Composizione

Cloruro di alchil-benzil-dimetil-ammonio g 0,5
 2-idrossidifenil g 0,5
 Profumo g 1,5
 Glicerina: Alcanolammide Poliglicoletere,
 Alchilpoliglicoletere, Acqua deionizzata q.b. a.....g 100

Presidio medico chirurgico

Reg. Min. Salute N. 16161

Scadenza:

5 anni

Confezionamenti

CE 0546

500007 - Sporigerm Mani
 6 flaconi da 1000 ml + 2 nebulizzatori
500002 - Dispenser
 Dispenser a muro con fotocellula

Web





Gel disinfettante senz'acqua

- ✓ **Gel disinfettante mani, senz'acqua**
Disinfetta, rinfresca e profuma le vostre mani con aroma al cedro.
Elimina gli odori dalle mani.
- ✓ **Agisce rapidamente**
Elimina fino al 99,9% di batteri, funghi e virus

Composizione

Alcool etilico denaturato,
Eccipienti e acqua depurata

Presidio medico chirurgico

è un PMC presidio medico chirurgico
ed è attivo su: HIV, HBV, HCV, TBC

Confezionamenti

31419407
Amuchina Gel
12 Flaconi da 500 ml con dispenser

Web



Amuchina® MD

DISINFEZIONE
IMPRONTE



Clorossidante elettrolitico
**per la disinfezione
d'alto livello
delle impronte dentali**

Attivo su: TBC - HIV - HBV - HCV
Clorossidante elettrolitico
per la disinfezione
d'alto livello delle impronte dentali.
Il prodotto è concentrato,
può essere diluito al 5% o al 10%.

Confezionamenti



31419410 - Amuchina MD
12 Flaconi da 1 lt

Web



Antisapril

DISINFEZIONE
PAVIMENTI



Clorossidante elettrolitico
**per la deterzione
e disinfezione
delle superfici lavabili**

Il prodotto è concentrato e deve essere
diluito al 5% per detergere ed igienizzare
pavimenti e superfici. In caso si voglia
effettuare una disinfezione d'alto livello
si dovrà diluire Antisapril al 10% per un
tempo di contatto di 5 minuti.
Ottima profumazione
e notevole praticità d'uso.
Validità 3 anni.

Confezionamenti



31419412 - Antisapril
12 flaconi da 1 lt

Web



Amuchina® PMC

DISINFEZIONE
CANALARE



Soluzione
**per lavaggi canalari
e disinfezione
del cavo orale**

Attivo su: TBC - HIV - HBV - HCV
Soluzione per lavaggi canalari
e disinfezione del cavo orale
a base di cloro attivo
e cloruro di sodio.

Confezionamenti

31419408 - Amuchina PMC
12 flaconi da 1 lt

Web



Vaschette

DISINFEZIONE
STRUMENTI

Vaschette **per decontaminazione**



Vaschetta
da 1 lt.

Vaschetta
da 3 lt.

Confezionamenti

310050 - Vaschetta da 1 lt
310051 - Vaschetta da 3 lt

Web

